


**Struttura dell'idropulsore**

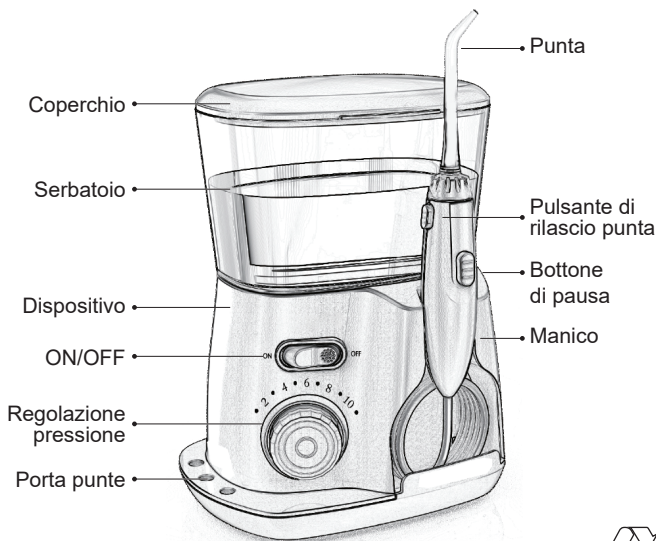

**Grazie per aver scelto l'idropulsore anteamed**

Utilizzando una combinazione di tecnologia ad alta pressione e flusso ad impulsi, l'idropulsore anteamed può pulire le aree tra i denti e le gengive dove lo spazzolino tradizionale non può arrivare, garantendo una migliore igiene orale. Inoltre, il flusso d'acqua pulsato favorisce la circolazione sanguigna nelle gengive e la loro salute.

**Leggere attentamente il manuale dell'utente prima dell'uso e conservare queste istruzioni per riferimento futuro.**

**Attenzione**

01. Non maneggiare la spina con le mani bagnate.
02. Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
03. Non utilizzare durante il bagno.
04. Non prendere il prodotto che è caduto nell'acqua.
05. Non spruzzare acqua sotto la lingua, nell'orecchio, nel naso o in altre aree delicate. La pressione generata da questo prodotto può causare danni.
06. Utilizzare solo punte e accessori di marca anteamed.
07. Per evitare l'ostruzione delle pompe e dell'impugnatura, non aggiungere nel serbatoio prodotti granulari come il sale.
08. Tenere il cavo elettrico lontano dalle superfici riscaldate.
09. Riempi il serbatoio con acqua o soluzione consigliata dal tuo dentista di fiducia.
10. Non usare se la bocca o la lingua hanno una ferita aperta.
11. Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto.

**Bottone di pausa**

È possibile premere il pulsante di pausa sull'impugnatura in qualsiasi momento per interrompere temporaneamente il flusso.

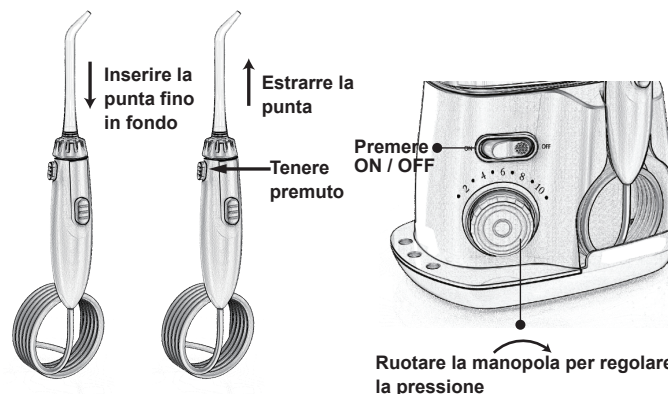


Figura 2

Figura 3

**Come utilizzare**

01. Inserire la spina di alimentazione in una presa elettrica.
02. Rimuovere il coperchio del serbatoio. Riempire d'acqua il serbatoio. Premere saldamente il serbatoio verso il basso. (Figura 1)
03. Inserire la punta al centro dell'impugnatura fino alla fine. Per rimuovere la punta dall'impugnatura, tenere premuto il pulsante di rilascio, quindi estrarre la punta dall'impugnatura. (figura 2)
04. Premere ON / OFF per avviare o arrestare. Ruotare la manopola di in senso orario per regolare la pressione dell'acqua. (figura 3)
05. Mettere la punta in bocca, spruzzare verso i denti e pulirli uno per uno lungo il bordo gengivale.
06. Quando la posizione della punta è inferiore al livello dell'acqua del serbatoio, anche se l'idropulsore non funziona, l'acqua uscirà dalla punta. Questo è un fenomeno naturale, quindi per favore non mettere il manipolo sul tavolo. Assicurarsi di mettere il manipolo sulla staffa dopo l'uso.

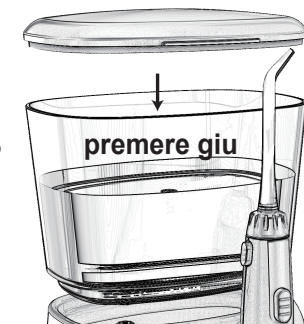


Figura 1

**Modalità di lavaggio corretta**

Quando si utilizza il dispositivo, abbassare la testa, chinarsi, mettere la punta in bocca, accendere inizialmente con bassa pressione, mirare ai denti e sciacquare ogni dente lungo il bordo gengivale. Concentrarsi sulla pulizia delle aree nascoste come il solco alveolare e i denti del giudizio, in modo che l'acqua possa defluire dalla bocca e sputare naturalmente. Non aprire la bocca per evitare schizzi d'acqua su se stessi. (figura 4)

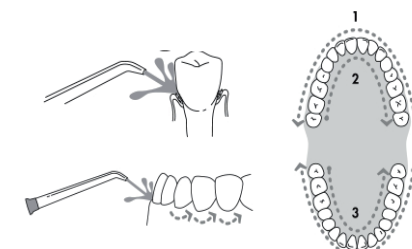


Figura 4

## Uso del collutorio e di altre soluzioni

L' idropulsore anteaMED può essere utilizzato per erogare collutori e soluzioni antibatteriche. Si prega di consultare un dentista professionista per consigli su una soluzione adatta a voi. Nota: il contenuto di alcol delle soluzioni speciali lasciate nella macchina ridurrà la durata dell'idropulsore anteaMED.

Dopo ogni utilizzo di una soluzione diversa dall' acqua, è necessario dedicare un pò di tempo al lavaggio del dispositivo. Riempi d'acqua il serbatoio, punta la punta verso il lavandino e accendi il dispositivo. Lasciar funzionare il dispositivo finché il serbatoio non è vuoto. Questo rimuoverà i residui di soluzione e previene l'ostruzione.

### Guida

Problema	Causa	Azione correttiva
----------	-------	-------------------

Il motore gira senza flusso d'acqua	Il serbatoio dell'acqua non è ben inserito	Premere verso il basso il serbatoio
-------------------------------------	--	-------------------------------------

Perdita tra il manico e la punta	La punta non è ben inserita	Inserire la punta fino in fondo nel manico
----------------------------------	-----------------------------	--

Se hai ancora problemi contatta il servizio di assistenza tecnica.

### Tipi di punte

anteamed ST-300 (punta standard)

General Use

For General Use

anteamed DE-300 (punta Pik Pocket)

Periodontal Pockets

For Pik Pocket

anteamed GS-300 (punta pulisci lingua)

Fresher Breath

For Fresh Breath

## antea<sub>med</sub>

Nome del prodotto: Idropulsore anteaJET

Modello: anteaJET

Voltaggio: 100V-240V

Frequenza: 50 ~ 60Hz

Consumo: 12W

Origine: Cina

Distribuito da: RAM Apparecchi Medicali srl

Via G. Casaregis 19/25r - 16129 Genova - Italy

010.5761476 - info@anteamed.it