

**BILANCIA PESANEONATI A SCORRIMENTO MECCANICO**  
**MECHANICAL SLIDING WEIGHT BABY SCALES**  
**PÈSE-BÉBÉS MÉCANIQUES À POIDS COULISSANTS**  
**BALANZA PESABEBÉS MECÁNICA DESLIZANTE**  
**BALANÇAS DE BEBÉ MECÂNICA COM PESOS DESLIZANTES**  
**MECHANISCHE SÄUGLINGSWAAGEN MIT LAUFGEWICHTEN**  
**CÂNTAR MECANIC PENTRU COPII CU MECANISM GLISANT**  
**ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ**

Manuale d'uso - User manual - Mode d'emploi - Manual de instrucciones - Manual de Operação -  
Bedienungsanleitung - Manual de utilizare - Εγχειρίδιο Χρήσης

**Gima 27300**

Fabbricante, Manufacturer, Fabricant, Fabricante, Fabricante, Hersteller, Producător, Παραγωγός:  
**Wuxi Weigher Factory Co., Ltd.**  
Majiagiao, Guangfeng, Guangyi - 214011  
Wuxi City, Jiangsu – People's Republic of China  
scale8@aliyun.com  
Made in China

**REF** RGT-20A

Importato e distribuito da/Imported and distributed by/Importé et distribué par/Importado y distribuido por/Importado e distribuído por/Importiert und vertrieben von/Importat și distribuit de/  
Εισαγωγή και διανομή από:  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



**Cântarul dumneavoastră mecanic cu mecanism glisant** este un produs de calitate și poate fi, de asemenea, utilizat și în domeniile unde nu sunt necesare cântări aprobate. Funcția cântarului este aceea de a măsura greutatea copilului. Doar personalul instruit va înregistra cel mai bun rezultat al procesului de cântărire. Asigurați-vă că cântarul este așezat pe o suprafață sigură și suficient de mare.

**Bebelușul trebuie supravegheat tot timpul cât se află întins pe cântar.** Cântarul este un instrument de precizie și trebuie tratat în consecință. Prin urmare, vă rugăm să citiți și să respectați întru totul instrucțiunile cuprinse în manualul de utilizare

#### • Specificații

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Model</b>                             | <b>RGT-20A</b>              |
| <b>Max.</b>                              | <b>20 kg</b>                |
| <b>Divizie</b>                           | <b>10 g</b>                 |
| <b>Dimensiunea tăviței</b>               | <b>57X30 (LXW) cm</b>       |
| <b>Dimensiunea în ansamblu</b>           | <b>57X33X28 (LXW XH) cm</b> |
| <b>Greutatea cântarului fără sarcină</b> | <b>6,5 kg</b>               |


#### • Instalarea și utilizarea cântarului

##### Verificați conținutul cutiei

- Tăvița pentru bebeluși
- Platforma cântarului include 2 șuruburi de fixare pentru atașarea tăviței pentru bebeluși
- Manual de utilizare


##### Asamblare

Îndepărtați platforma de cântărire și tăvița pentru bebeluși din cutie și păstrați ambalajul în caz de necesitate

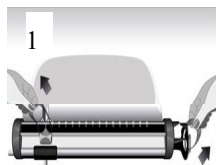

#### Pictograma 1: Îndepărtați siguranța de transport a greutăților glisante și a barei de greutate glisante.

Greutățile glisante, precum și bara de ghidare pentru greutate sunt asigurate pentru transport. Scoateți cu grijă materialul de fixare. Asigurați-vă că bara de ghidare pentru greutate rămâne nemișcată.

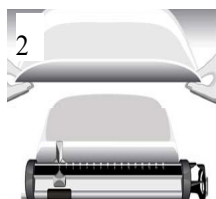


#### Pictograma 2: Montarea tăvii pentru bebeluși.

Slăbiți cele 2 șuruburi de fixare de la baza cântarului folosind o șurubelniță sau un poanson. Așezați tava pentru bebeluși pe bază, introduceți cele 2 șuruburi în orificiile corespunzătoare și strângeți-le bine din nou. **Acum eliberați bara de ghidare pentru greutate**




#### Pictograma 3: Calibrare aproximativă

Așezați cântarul în zona de lucru și asigurați-vă că suprafața pe care este așezat este uniformă. Pentru a obține cea mai precisă citire, este absolut necesară o setare corectă la zero. Pentru a face acest lucru, reglați ambele greutăți de ghidare în poziția ZERO. Indicatorul (brațul) și brațul contorului trebuie să fie complet în linie. Dacă nu sunt aliniate, trebuie setată valoarea zero.

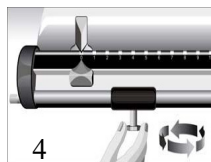

#### Pictograma 4: Pentru a face acest lucru, utilizați greutatea tară. Prin desfacerea piuliței moletate.

Greutatea tară poate fi ușor împinsă de fiecare parte a barei până când brațul și contrabrațul se aliniază destul de precis. Asigurați-vă că fixați din nou piulița moletată. Greutatea tară este, de asemenea, utilizată pentru a reduce greutatea obiectelor de pe tavă (de exemplu, un obiect vestimentar).

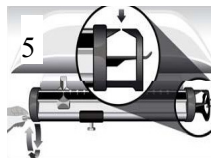

#### Ajustare fină

#### Pictograma 5: Indică poziția șurubului de calibrare fină.

Rotiți-l fie în partea dreaptă, fie în partea stângă și opriți-vă atunci când brațul și contrabrațul sunt aliniate 100%.

#### Atenție:

Ar trebui efectuată o setare periodică la zero conform instrucțiunilor anterioare. Acest lucru se aplică în special în situația când cântarul este utilizat într-un loc diferit, pe o suprafață diferită

#### Cântărire

- După ce calibrarea aproximativă și reglarea fină sunt realizate cu succes, bebelușul poate fi cântărit.
- Așezați bebelușul în tăviță.
- Glisați greutatea mare de ghidare conform greutății bebelușului.
- Folosind greutatea mică de ghidare, puteți determina cu ușurință greutatea exactă, împingând-o de-a lungul până când brațul și contrabrațul se aliniază complet.
- Greutatea exactă a bebelușului reprezintă suma celor două rezultate de greutate (greutatea de ghidare mai mare și mai mică).

#### • Verificarea calității

Produsele corespund directivelor CE aplicabile și standardelor europene pentru fabricarea și distribuirea în întreaga lume a echipamentelor de cântărire și măsurare conform celui mai recent standard tehnic, oferind o durată de viață lungă și fiabilitate continuă. Produsele corespund directivelor CE aplicabile și standardelor europene pentru fabricarea și distribuirea în întreaga lume conform celor mai recente standarde tehnice, asigurând o durată lungă de viață și fiabilitate continuă.

#### • Curățare, întreținere și reaprobare

##### Securitate

#### - Cântarul dumneavoastră pentru bebeluși este un instrument de precizie. Manevrați-l cu grijă.

- Nu-l scăpați, nu săriți pe el și nu lăsați obiecte grele să cadă pe el.
- Când utilizați cântarul, respectați întotdeauna cu precizie regulile și recomandările din acest manual de utilizare.
- Asigurați-vă că niciun lichid nu pătrunde în cântar.

##### Curățare

Pentru curățare, utilizați doar o cârpă umedă sau lichide de curățare obișnuite. Nu utilizați lichide de curățare agresive

##### Depozitare și transport

Păstrați toate componentele și piesele originale pentru un eventual retur al cântarului în vederea evitării oricărei posibile deteriorări în timpul transportului, care va duce automat la pierderea garanției.

#### CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.