

MA0RA303 - KIT ANTIDECUBITO CON MATERASSINO E COMPRESSORE CON REGOLAZIONE

DESTINAZIONE D'USO

La linea di kit compressore e materasso è progettata per la prevenzione e il trattamento delle piaghe da decubito che possono verificarsi in tutte quelle situazioni che richiedono una lunga degenza ospedaliera e/o domiciliare.

AVVERTENZE GENERALI

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapista
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini
- L'utilizzatore e/o il paziente dovrà segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

INSTALLAZIONE

Disimballare il dispositivo per verificare che non abbia subito alcun danno durante la spedizione. Se si riscontra qualche danno, contattare immediatamente il rivenditore.

1. Posizionare il materasso gonfiabile sopra un normale materasso in modo che i raccordi per la connessione dei tubi dell'aria siano posizionati verso i piedi del letto.
2. Appendere il compressore ai piedi del letto usando gli appositi ganci posti sul retro della compressore, oppure posizionarla su di una superficie piana
3. Connettere i due tubi di collegamento ai connettori del compressore e del materasso
4. Collegare la spina alla presa elettrica
5. Accendere l'interruttore situato sul lato destro del compressore.

NOTA:

1. Verificare che il voltaggio dell'impianto elettrico sia adatto per il compressore
2. Anche la presa può servire da interruttore per disinserire l'apparecchio

ATTENZIONE!

- La pompa può essere applicata solo al materassino consigliato dal produttore.
- Non usarla per alcun altro scopo. (Elemento applicato: materassino ad aria)
- È consigliabile posizionare il materasso ad elementi intercambiabili sopra ad un materassino con un'altezza non inferiore a 5 cm.
- Verificare che non vi siano piegature o schiacciamenti che ostruiscano il passaggio dell'aria.
- Non fumare sopra o vicino alla pompa.
- Mantenere la pompa lontano da superfici riscaldate.
- Rischio di esplosione se utilizzato in presenza di anestetici infiammabili.

Alcuni consigli per l'installazione:

Dopo l'installazione, arrotolare il cavo eventualmente rimasto libero per evitare di inciampare. Il dispositivo deve essere sistemato in un posto completamente accessibile all'utente o ai medici.

PRIMA DI OGNI USO

Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al collegamento dei tubi tra materasso e compressore.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Materasso

Pulire regolarmente il materasso con detergente neutro o alcol. Non è possibile effettuare la sterilizzazione a caldo o a vapore.

Pompa

Pulire regolarmente la pompa con detergente neutro o alcol. Non aprire l'alloggiamento della pompa - rischio di folgorazione. Non bagnare o immergere la pompa in alcun liquido

CONDIZIONI DI SMALTIMENTO


In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.



Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE:

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di

cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature elettromedicali, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile sbarrato.

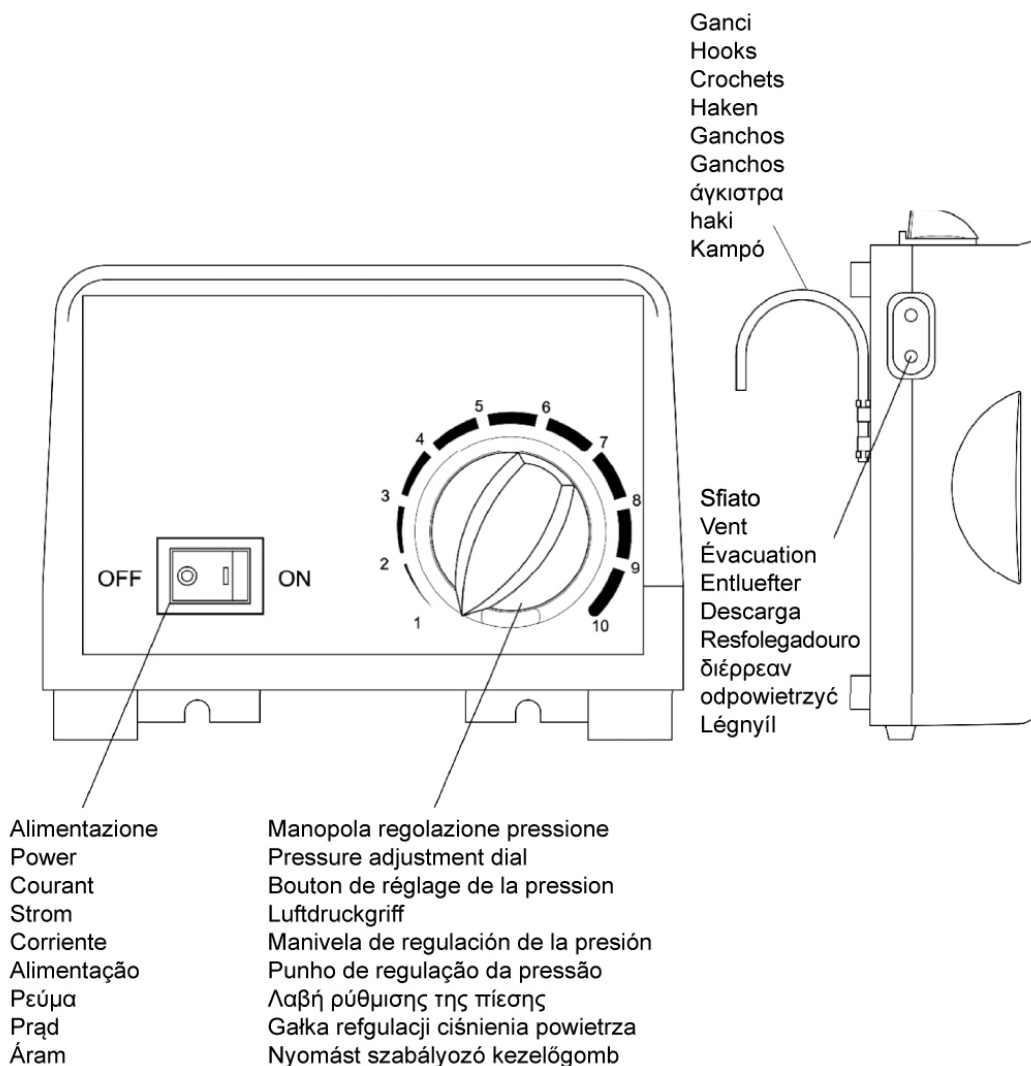

REF

LOT

MA0RA303

Vedi l'etichetta sotto il dispositivo

(01)08051882210393(10)xxxxxx

Compressore antidecubito con materasso a bolle



RAM Apparecchi Medicali srl
Via Casaregis 19/25r – 16129 Genova – Italy
+39.010.5761476 - info@anteamed.it

