

MA0RA303 - ANTI-DEKUBITUS-KIT MIT MATTE UND KOMPRESSOR MIT EINSTELLUNG

VERWENDUNGSZWECK

Die Reihe von Kompressor- und Matratzen-Kits ist für die Vorbeugung und Behandlung von Dekubitus konzipiert, die in all jenen Situationen auftreten können, die einen langen Krankenhaus- und / oder Gastaufenthalt erfordern.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- Für die ordnungsgemäße Verwendung des Gerätes lesen Sie sorgfältig die folgende Bedienungsanleitung
- Für die richtige Verwendung des Geräts konsultieren Sie immer Ihren Arzt oder Therapeuten
- Bewahren Sie das verpackte Produkt von jeder Wärmequelle fern, da die Verpackung aus Pappe besteht
- Die Lebensdauer des Gerätes wird durch den Verschleiß von nicht reparierbaren und/oder austauschbaren Teilen bestimmt
- Achten Sie immer auf die Anwesenheit von Kindern
- Der Anwender und/oder Patient meldet dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, jedes schwerwiegende Vorkommnis im Zusammenhang mit dem Produkt.

INSTALLATION

Packen Sie das Gerät aus, um sicherzustellen, dass es während des Transports keinen Schaden erlitten hat. Wenn Sie einen Schaden feststellen, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler.

1. Legen Sie die aufblasbare Matratze auf eine normale Matratze, so dass die Armaturen zum Anschließen der Luftschläuche am Fußende des Bettes angebracht sind.
2. Hängen Sie den Kompressor mit den Haken auf der Rückseite des Kompressors am Fußende des Bettes auf oder legen Sie ihn auf eine ebene Fläche
3. Verbinden Sie die beiden Verbindungsschläuche mit den Kompressor- und Matratzenanschlüssen
4. Schließen Sie den Stecker an die Steckdose an.
5. Schalten Sie den Schalter auf der rechten Seite des Kompressors ein.

ANMERKUNG:

1. Überprüfen Sie, ob die Spannung des elektrischen Systems für den Kompressor geeignet ist
2. Die Steckdose kann auch als Schalter zum Trennen des Geräts dienen.

AUFMERKSAMKEIT!

- Die Pumpe kann nur auf die vom Hersteller empfohlene Matte aufgebracht werden.
- Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke. (Angewandtes Element: Luftmatte)
- Es ist ratsam, die Matratze mit austauschbaren Elementen auf eine Matratze mit einer Höhe von mindestens 5 cm zu legen.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Biegungen oder Quetschungen den Luftdurchgang behindern.
- Rauchen Sie nicht an oder in der Nähe der Pumpe.
- Halten Sie die Pumpe von erwärmten Oberflächen fern.
- Explosionsgefahr bei Anwendung in Gegenwart von brennbaren Anästhetika.

Einige Installationstipps:

Rollen Sie nach der Installation alle Kabel auf, die frei bleiben, um ein Auslösen zu vermeiden. Das Gerät muss an einem Ort aufgestellt werden, der für den Benutzer oder die Ärzte uneingeschränkt zugänglich ist.

VOR JEDEM GEBRAUCH

Überprüfen Sie die korrekte Montage des Gerätes unter besonderer Berücksichtigung der Verbindung der Rohre zwischen der Matratze und dem Kompressor.

REINIGUNGSANLEITUNG

Matratze

Reinigen Sie die Matratze regelmäßig mit neutralem Reinigungsmittel oder Alkohol. Eine Heiß- oder Dampfsterilisation ist nicht möglich.

Pumpe

Reinigen Sie die Pumpe regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel oder Alkohol. Öffnen Sie nicht das Pumpengehäuse
- Gefahr eines Stromschlags. Die Pumpe darf nicht benetzt oder in eine Flüssigkeit getaucht werden.

ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN


Verwenden Sie im Falle der Entsorgung des Geräts niemals die normalen Siedlungsabfallabgabesysteme. Stattdessen empfiehlt es sich, das Gerät über die gemeinsamen kommunalen Ökoinseln für die geplanten Recyclingmaßnahmen der verwendeten Materialien zu entsorgen.



Warnhinweise zur fachgerechten Entsorgung des Produktes gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU:

Am Ende seiner Nutzungsdauer darf das Produkt nicht zusammen mit dem Siedlungsabfall entsorgt werden. Es kann an die entsprechenden getrennten Sammelstellen geliefert werden, die von den Gemeindeverwaltungen eingerichtet wurden,

oder an Einzelhändler, die diesen Service anbieten. Die getrennte Entsorgung des Produkts vermeidet mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung ergeben, und ermöglicht die Rückgewinnung der Materialien, aus denen es besteht, um eine erhebliche Einsparung von Energie und Ressourcen zu erzielen. Um die Pflicht zur getrennten Entsorgung von elektromedizinischen Geräten zu unterstreichen, trägt das Produkt das Kennzeichen des durchgestrichenen mobilen Müllcontainers.

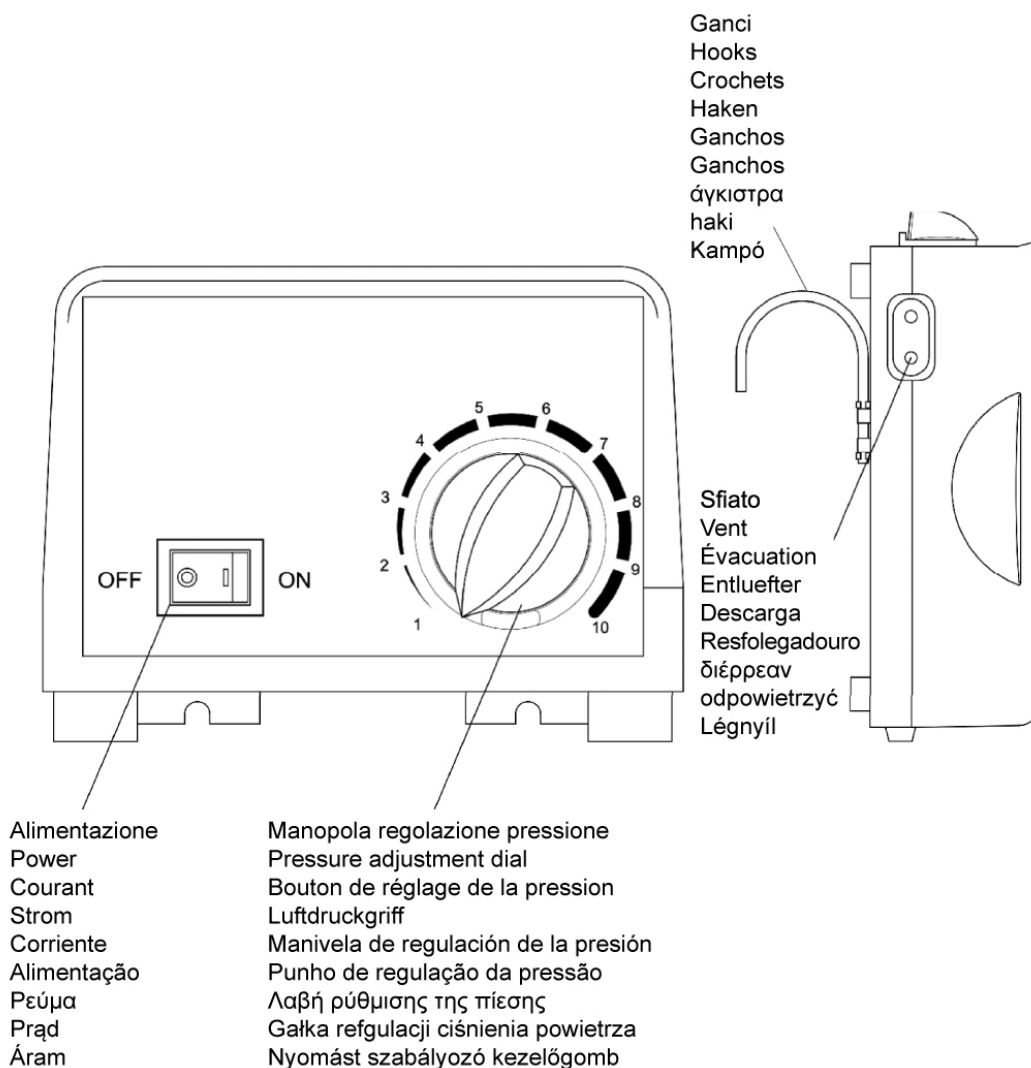

REF

LOT

MA0RA303

Siehe das Etikett unter dem Gerät

(01)08051882210393(10)xxxxxx

Compressore antidecubito con materasso a bolle



RAM Apparecchi Medicali srl
Via Casaregis 19/25r – 16129 Genova – Italy
+39.010.5761476 - info@anteamed.it

