

## MA0RA303 - KIT ANTI-DÉCUBITUS AVEC TAPIS ET COMPRESSEUR AVEC RÉGLAGE

### UTILISATION PRÉVUE

La gamme de kits de compresseurs et de matelas est conçue pour la prévention et le traitement des escarres qui peuvent survenir dans toutes les situations nécessitant un long séjour à l'hôpital et / ou à la maison.

### AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Pour une utilisation correcte de l'appareil, reportez-vous attentivement au manuel suivant
- Pour une utilisation correcte de l'appareil, consultez toujours votre médecin ou votre thérapeute
- Gardez le produit emballé loin de toute source de chaleur car l'emballage est en carton
- La durée de vie utile de l'appareil est déterminée par l'usure des pièces non réparables et/ou remplaçables
- Faites toujours attention à la présence d'enfants
- L'utilisateur et/ou le patient signalent tout incident grave survenu en relation avec le dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et /ou le patient sont établis.

### INSTALLATION

Déballer l'appareil pour vérifier qu'il n'a subi aucun dommage pendant le transport. Si vous constatez des dommages, contactez immédiatement votre concessionnaire.

1. Placez le matelas gonflable sur un matelas ordinaire de sorte que les raccords pour connecter les tuyaux d'air soient placés vers le pied du lit.
2. Suspendez le compresseur au pied du lit à l'aide des crochets à l'arrière du compresseur ou placez-le sur une surface plane
3. Connectez les deux tuyaux de raccordement aux connecteurs du compresseur et du matelas
4. Branchez la fiche à la prise électrique
5. Mettez sous tension l'interrupteur situé sur le côté droit du compresseur.

#### NOTE:

1. Vérifiez que la tension du système électrique est adaptée au compresseur
2. La prise peut également servir d'interrupteur pour déconnecter l'appareil

#### ATTENTION!

- La pompe ne peut être appliquée que sur le tapis recommandé par le fabricant.
- Ne l'utilisez pas à d'autres fins. (Élément appliqué: tapis pneumatique)
- Il est conseillé de placer le matelas avec des éléments interchangeables sur un matelas d'une hauteur d'au moins 5 cm.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de coudes ou d'écrasements obstruant le passage de l'air.
- Ne fumez pas sur ou près de la pompe.
- Gardez la pompe à l'écart des surfaces chauffées.
- Risque d'explosion en cas d'utilisation en présence d'anesthésiques inflammables.

#### Quelques conseils d'installation :

Après l'installation, enroulez tout câble laissé libre pour éviter de se déclencher. L'appareil doit être placé dans un endroit entièrement accessible à l'utilisateur ou aux médecins.

### AVANT CHAQUE UTILISATION

Vérifiez le montage correct de l'appareil en portant une attention particulière à la connexion des tuyaux entre le matelas et le compresseur.

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

#### Matelas

Nettoyez régulièrement le matelas avec un détergent neutre ou de l'alcool. La stérilisation à chaud ou à la vapeur n'est pas possible.

#### Pompe

Nettoyez régulièrement la pompe avec un détergent doux ou de l'alcool. N'ouvrez pas le boîtier de la pompe - risque d'électrocution. Ne pas mouiller ou immerger la pompe dans un liquide

### CONDITIONS D'ÉLIMINATION


En cas d'élimination de l'appareil, n'utilisez jamais les systèmes normaux de livraison des déchets solides municipaux . Au lieu de cela, il est recommandé d'éliminer l'appareil à travers les îlots écologiques municipaux communs pour les opérations de recyclage prévues des matériaux utilisés.

#### Avertissements pour l'élimination correcte du produit conformément à la directive européenne 2012/19/UE:



À la fin de sa vie utile, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux. Il peut être livré aux centres de collecte séparés appropriés mis en place par les administrations municipales, ou aux détaillants qui fournissent ce service. L'élimination séparée du produit évite les éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé découlant de son élimination inadéquate et permet de récupérer les matériaux qui le composent afin d'obtenir une

économie importante d'énergie et de ressources. Pour souligner l'obligation d'éliminer séparément les équipements électromédicaux, le produit porte la marque du conteneur à ordures mobile barré.

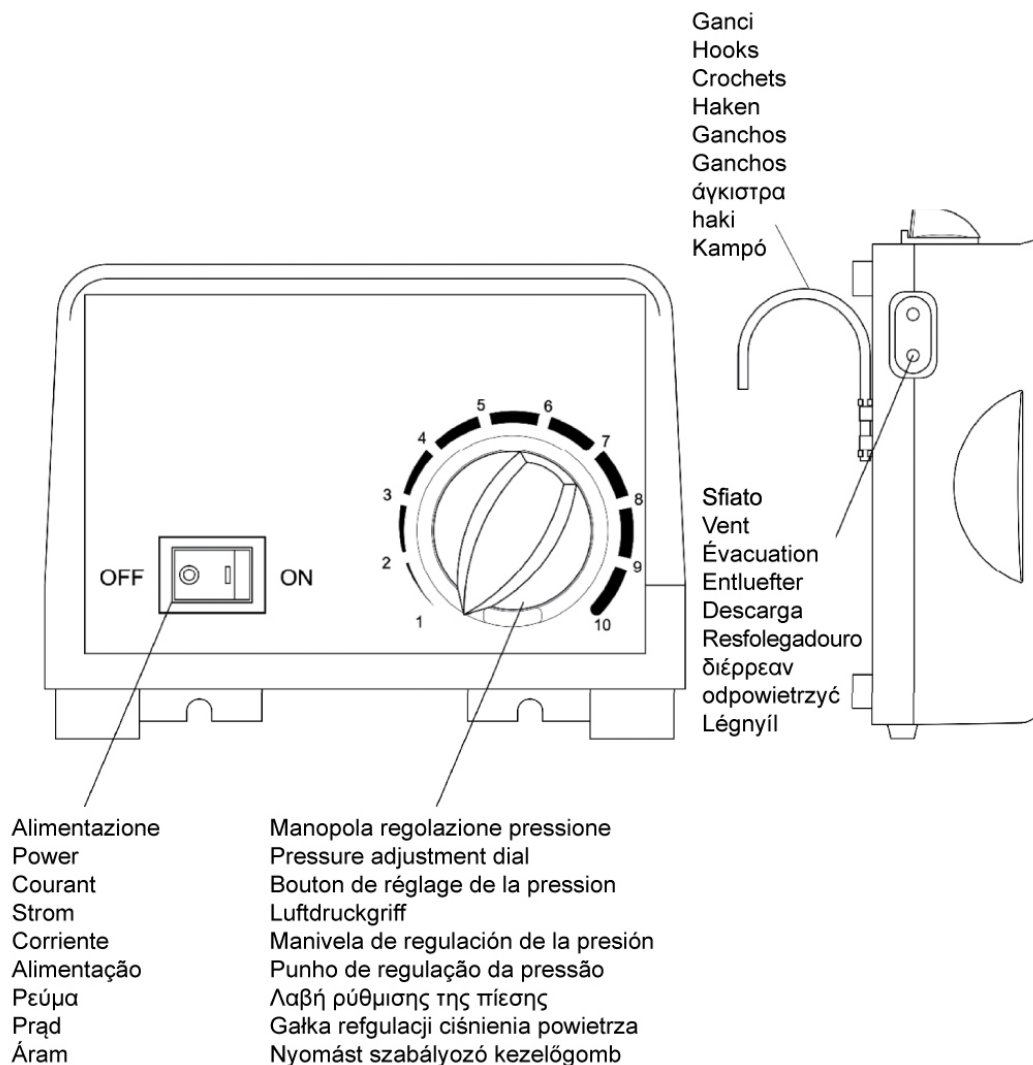

**REF**


**LOT**

**MA0RA303**

Voir l'étiquette sous l'appareil

(01)08051882210393(10)xxxxxx

Compressore antidecubito con materasso a bolle

 RAM Apparecchi Medicali srl  
Via Casaregis 19/25r – 16129 Genova – Italy  
+39.010.5761476 - info@anteamed.it

