

MA0RA303 - ZESTAW PRZECIWODLEŻYNOWY Z MATĄ I KOMPRESOREM Z REGULACJĄ

PRZEZNACZENIE

Linia zestawów sprężarek i materacy jest przeznaczona do zapobiegania i leczenia odleżyn, które mogą wystąpić we wszystkich sytuacjach, które wymagają długiego pobytu w szpitalu i / lub domu.

OSTRZEŻENIA OGÓLNE

- Aby prawidłowo korzystać z urządzenia, zapoznaj się z poniższą instrukcją
- W celu prawidłowego korzystania z urządzenia zawsze skonsultuj się z lekarzem lub terapeutą
- Trzymaj zapakowany produkt z dala od źródła ciepła, ponieważ opakowanie jest wykonane z tektury
- Żywotność urządzenia zależy od zużycia części nienadających się do naprawy i/lub wymiany
- Zawsze zwracaj uwagę na obecność dzieci
- Użytkownik lub pacjent zgłaszają wszelkie ciężkie incydenty związane z wyrobem producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

INSTALACJA

Rozpakuj urządzenie, aby sprawdzić, czy nie uległo ono uszkodzeniu podczas transportu. Jeśli znajdziesz jakiegokolwiek uszkodzenia, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.

1. Umieść nadmuchiwany materac na zwykłym materacu, tak aby złączki do podłączenia węży powietrznych były umieszczone w kierunku stopy łóżka.
2. Zawieś sprężarkę u stóp łóżka za pomocą haków z tyłu sprężarki lub umieść ją na płaskiej powierzchni
3. Podłącz dwa węże łączące do złączy sprężarki i materaca
4. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego
5. Włącz przełącznik znajdujący się po prawej stronie sprężarki.

NUTA:

1. Sprawdź, czy napięcie układu elektrycznego jest odpowiednie dla sprężarki
2. Gniazdo może również służyć jako przełącznik do odłączenia urządzenia

UWAGA!

- Pompę można nakładać tylko na matę zalecaną przez producenta.
- Nie używaj go do żadnych innych celów. (Zastosowany element: mata powietrzna)
- Wskazane jest umieszczenie materaca z wymiennymi elementami na materacu o wysokości nie mniejszej niż 5 cm.
- Sprawdź, czy nie ma zgięć ani zgnieceń utrudniających przepływ powietrza.
- Nie palić na pompie ani w jej pobliżu.
- Pompę należy trzymać z dala od ogrzewanych powierzchni.
- Ryzyko wybuchu w przypadku stosowania w obecności łatwopalnych środków znieczulających.

Kilka wskazówek dotyczących instalacji:

Po instalacji zwiń dowolny, który pozostał wolny, aby uniknąć potknięcia. Urządzenie musi być umieszczone w miejscu w pełni dostępnym dla użytkownika lub lekarzy.

PRZED KAŻDYM UŻYCIEM

Sprawdź prawidłowy montaż urządzenia, zwracając szczególną uwagę na połączenie rur między materacem a sprężarką.

INSTRUKCJE CZYSZCZENIA

Materac

Regularnie czyść materac neutralnym detergentem lub alkoholem. Sterylizacja na gorąco lub parą nie jest możliwa.

Pompa

Regularnie czyść pompę łagodnym detergentem lub alkoholem. Nie otwierać obudowy pompy - ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie zwilżać ani nie zanurzać pompy w żadnym płynie


WARUNKI USUWANIA

W przypadku utylizacji urządzenia nigdy nie należy stosować normalnych systemów dostarczania stałych odpadów komunalnych. Zamiast tego zaleca się utylizację urządzenia przez wspólne miejskie wyspy ekologiczne w celu planowanych operacji recyklingu użytych materiałów.

Ostrzeżenia dotyczące prawidłowej utylizacji produktu zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE:

Po upływie okresu użytkowania produktu nie wolno go wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Może być dostarczony do odpowiednich oddzielnych punktów zbiórki utworzonych przez administrację miejską lub do sprzedawców detalicznych, którzy świadczą tę usługę. Oddzielna utylizacja produktu pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia wynikających z jego niewłaściwej utylizacji i pozwala odzyskać materiały, z których się składa, w celu uzyskania znacznej oszczędności energii i zasobów. Dla podkreślenia obowiązku osobnej utylizacji sprzętu elektromedycznego produkt nosi znak przekreślonego ruchomego pojemnika na śmieci.



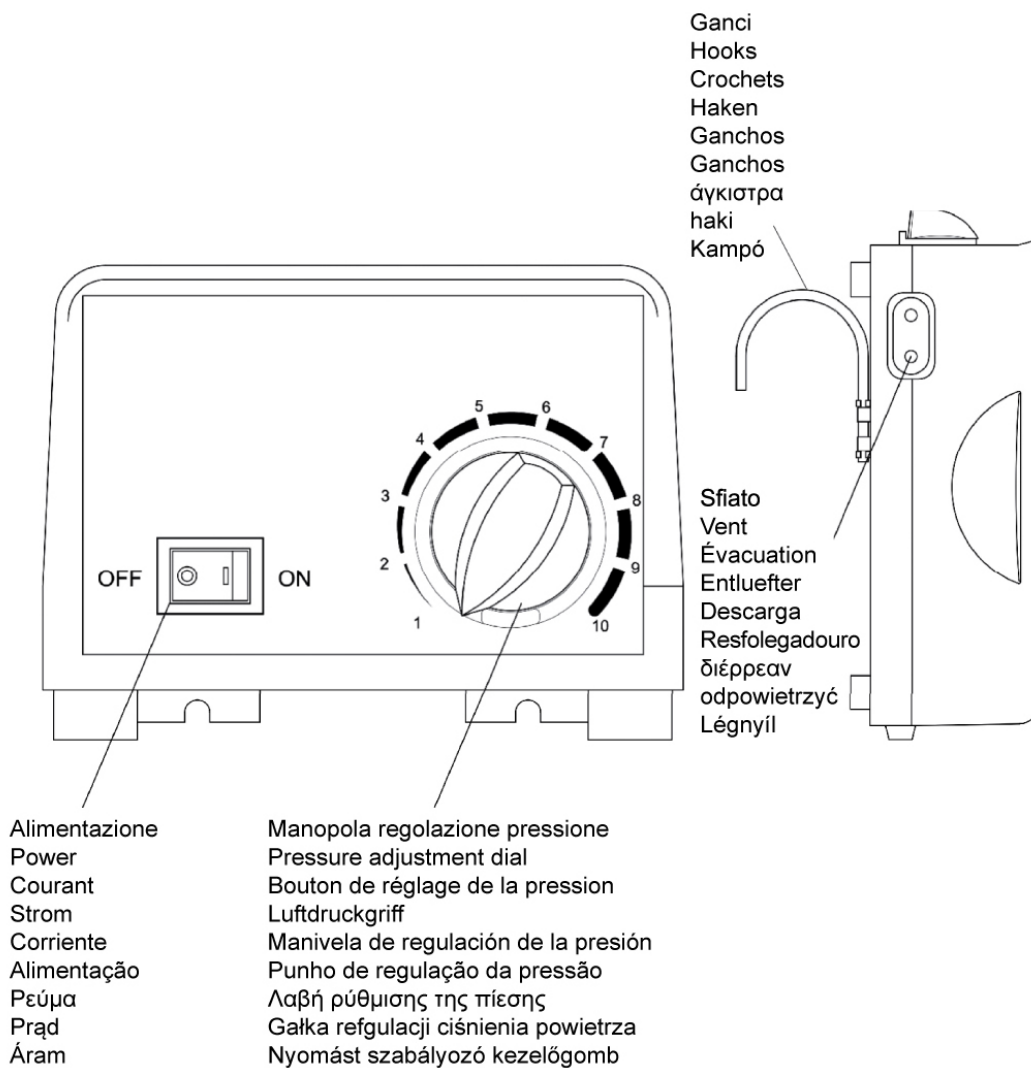

REF

LOT

MA0RA303

Zobacz etykietę pod urządzeniem

(01)08051882210393(10)xxxxxx

Compressore antidecubito con materasso a bolle



RAM Apparecchi Medicali srl
Via Casaregis 19/25r – 16129 Genova – Italy
+39.010.5761476 - info@anteamed.it

