

## MA0RA303 - KIT ANTI-DECÚBITO COM TAPETE E COMPRESSOR COM AJUSTE

### UTILIZAÇÃO PREVISTA

A linha de kits de compressores e colchões é projetada para a prevenção e tratamento de escaras que podem ocorrer em todas as situações que exijam uma longa permanência hospitalar e/ou domiciliar.

### ADVERTÊNCIAS GERAIS

- Para uma utilização adequada do dispositivo, consulte cuidadosamente o seguinte manual
- Para o uso adequado do dispositivo, consulte sempre o seu médico ou terapeuta
- Mantenha o produto embalado longe de qualquer fonte de calor, pois a embalagem é feita de papelão
- A vida útil do dispositivo é determinada pelo desgaste de peças não reparáveis e/ou substituíveis
- Preste sempre atenção à presença de crianças
- O utilizador e/ou doente deve comunicar qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou doente está estabelecido.

### INSTALAÇÃO

Desembale o dispositivo para verificar se não sofreu qualquer dano durante o transporte. Se encontrar algum dano, contacte imediatamente o seu concessionário.

1. Coloque o colchão inflável em cima de um colchão normal para que os acessórios para conectar as mangueiras de ar sejam colocados em direção ao pé da cama.
2. Pendure o compressor ao pé da cama usando os ganchos na parte de trás do compressor ou coloque-o em uma superfície plana
3. Conecte as duas mangueiras de conexão aos conectores do compressor e do colchão
4. Ligue a ficha à tomada elétrica
5. Ligue o interruptor localizado no lado direito do compressor.

#### OBSERVAÇÃO:

1. Verifique se a tensão do sistema elétrico é adequada para o compressor
2. A tomada também pode servir como um interruptor para desligar o aparelho

#### ATENÇÃO!

- A bomba só pode ser aplicada no tapete recomendado pelo fabricante.
- Não o utilize para qualquer outro fim. (Elemento aplicado: tapete de ar)
- É aconselhável colocar o colchão com elementos intercambiáveis em cima de um colchão com uma altura não inferior a 5 cm.
- Verifique se não existem curvaturas ou esmagamentos que obstruam a passagem do ar.
- Não fume na bomba ou perto dela.
- Mantenha a bomba afastada de superfícies aquecidas.
- Risco de explosão se utilizado na presença de anestésicos inflamáveis.

#### Algumas dicas de instalação:

Após a instalação, enrole qualquer cabo que fique livre para evitar tropeçar. O dispositivo deve ser colocado num local totalmente acessível ao utilizador ou aos médicos.

### ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO

Verifique a montagem correta do dispositivo com especial atenção à ligação dos tubos entre o colchão e o compressor.

### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

#### Colchão

Limpe o colchão regularmente com detergente neutro ou álcool. A esterilização a quente ou a vapor não é possível.

#### Bomba

Limpe a bomba regularmente com detergente neutro ou álcool. Não abra o alojamento da bomba - risco de eletrocussão. Não molhar nem mergulhar a bomba em qualquer líquido


### CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Em caso de eliminação do dispositivo, nunca utilize os sistemas normais de entrega de resíduos sólidos urbanos. Em vez disso, recomenda-se a eliminação do dispositivo através das ilhas ecológicas municipais comuns para as operações de reciclagem planeadas dos materiais utilizados.

#### Advertências para a correta eliminação do produto de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE:

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Pode ser entregue nos centros de recolha seletiva apropriados criados pelas administrações municipais ou nos retalhistas que prestam este serviço. A eliminação separada do produto evita possíveis consequências negativas para o ambiente e a saúde decorrentes da sua eliminação inadequada e permite recuperar os materiais que o compõem, a fim de obter uma importante poupança de energia e recursos. Para sublinhar a obrigação de eliminar o equipamento eletromédico separadamente, o produto ostenta a marca do recipiente de lixo móvel riscado.



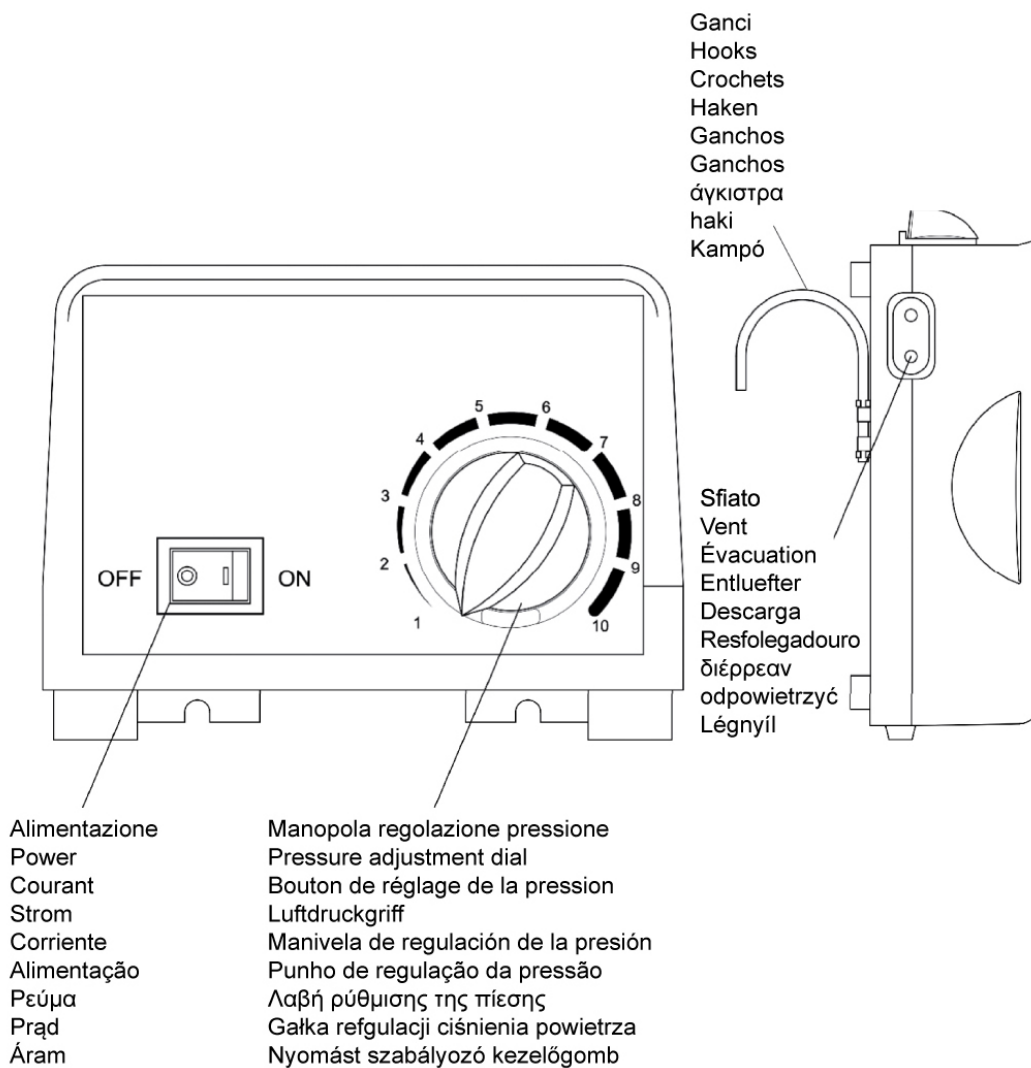

**REF**

**LOT**

**MA0RA303**

Veja a etiqueta abaixo do dispositivo

(01)08051882210393(10)xxxxxx

Compressore antidecubito con materasso a bolle



RAM Apparecchi Medicali srl  
Via Casaregis 19/25r – 16129 Genova – Italy  
+39.010.5761476 - info@anteamed.it

