

MA0RA303 - ANTI-DECUBITUS KIT MED MATTA OCH KOMPRESSOR MED JUSTERING

AVSEDD ANVÄNDNING

Linjen med kompressor- och madrasssatser är utformad för förebyggande och behandling av sängar som kan uppstå i alla de situationer som kräver ett långt sjukhus och / eller hemvistelse.

ALLMÄNNA VARNINGAR

- För korrekt användning av enheten, se noggrant följande manual
- För korrekt användning av enheten, kontakta alltid din läkare eller terapeut
- Håll den förpackade produkten borta från någon värmekälla eftersom förpackningen är gjord av kartong
- Produktens livslängd bestäms av slitaget på delar som inte kan repareras och/eller bytas ut
- Var alltid uppmärksam på närvaron av barn
- Användaren och/eller patienten ska rapportera alla allvarliga tillbud som inträffar med produkten till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

INSTALLATION

Packa upp enheten för att verifiera att den inte har skadats under frakten. Om du upptäcker några skador, kontakta din återförsäljare omedelbart.

1. Placera den uppblåsbara madrassen ovanpå en vanlig madrass så att beslagen för anslutning av luftslangarna placeras mot sängens fot.
2. Häng kompressorn vid foten av sängen med krokarna på kompressorns baksida eller placera den på en plan yta
3. Anslut de två anslutningsslangarna till kompressorn och madrasskontakterna
4. Anslut kontakten till eluttaget
5. Slå på strömbrytaren på kompressorns högra sida.

NOT:

1. Kontrollera att spänningen i det elektriska systemet är lämplig för kompressorn
2. Uttaget kan också fungera som en strömbrytare för att koppla bort apparaten

UPPMÄRKSAMHET!

- Pumpen kan endast appliceras på den matta som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd den inte för något annat ändamål. (Applicerat element: luftmatta)
- Det är lämpligt att placera madrassen med utbytbara element ovanpå en madrass med en höjd av minst 5 cm.
- Kontrollera att det inte finns några böjningar eller krossning som hindrar luftens passage.
- Rök inte på eller i närheten av pumpen.
- Håll pumpen borta från uppvärmda ytor.
- Risk för explosion om den används i närvaro av brandfarliga anestetika.

Några installationstips:

Efter installationen, rulla upp alla kablar som lämnas fria för att undvika att snubbla. Enheten måste placeras på en plats som är fullt tillgänglig för användaren eller läkarna.

FÖRE VARJE ANVÄNDNING

Kontrollera korrekt montering av enheten med särskild uppmärksamhet på anslutningen av rören mellan madrassen och kompressorn.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

Madrass

Rengör madrassen regelbundet med neutralt tvättmedel eller alkohol. Varm- eller ångsterilisering är inte möjlig.

Pump

Rengör pumpen regelbundet med milt tvättmedel eller alkohol. Öppna inte pumphuset - risk för elstöt. Blöt inte eller sänk ner pumpen i någon vätska


VILLKOR FÖR BORTSKAFFANDE

Vid bortskaffande av enheten, använd aldrig de vanliga kommunala systemen för avlämning av fast avfall . Istället rekommenderas att kassera enheten via de gemensamma kommunala ekologiska öarna för den planerade återvinningen av de använda materialen.

Varningar för korrekt kassering av produkten enligt europeiskt direktiv 2012/19 / EU:

Vid slutet av dess livslängd får produkten inte kasseras tillsammans med kommunalt avfall. Den kan levereras till lämpliga separata insamlingscentraler som inrättats av de kommunala förvaltningarna eller till återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst. Genom att bortskaffa produkten separat undviks eventuella negativa konsekvenser för miljö och hälsa till följd av otillräckligt bortskaffande och det är möjligt att återvinna de material som den består av för att uppnå en betydande besparing av energi och resurser. För att understryka skyldigheten att kassera elektromedicinsk utrustning separat är produkten försedd med märket för den överkursade mobila sopbehållaren.



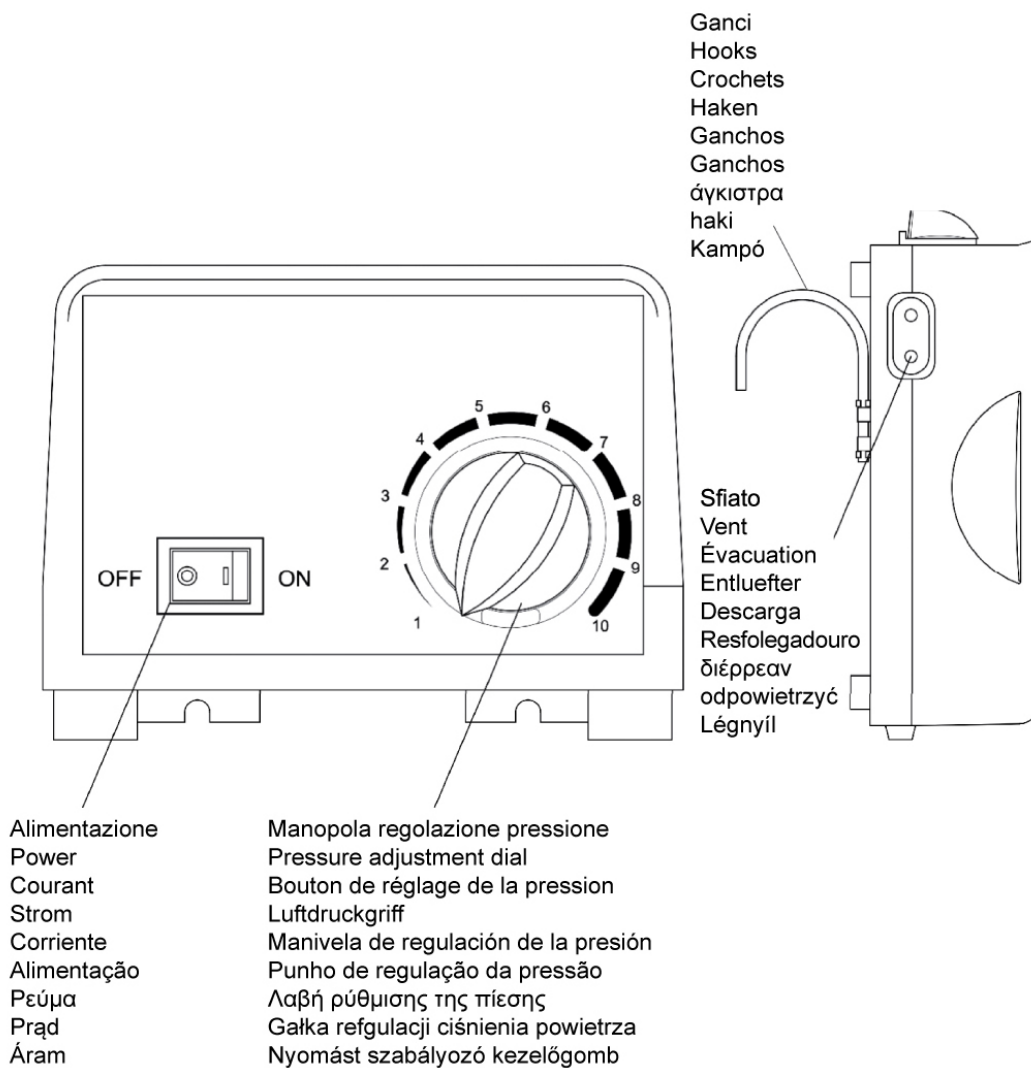

REF

LOT

MA0RA303

Se etiketten under enheten

(01)08051882210393(10)xxxxxx

Compressore antidecubito con materasso a bolle



RAM Apparecchi Medicali srl
Via Casaregis 19/25r – 16129 Genova – Italy
+39.010.5761476 - info@anteamed.it

