

BIOPSY PUNCH





(FI) Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.



(FI) Steriili. Vain KERTAKÄYTTÖÖN.
Jos useita koepaloja tai näytteitä otetaan samalta potilaalta, on käytettävä uutta laitetta joka kerta.
→ Älä steriloi uudelleen tai käytä uudelleen infektioriskin vuoksi.
→ Älä käytä, jos steriili sisäpakkaus on vahingoittunut tai vaurioitunut.


(FI) Saatavilla olevat koot:
2; 3; 3.5; 4; 5; 6 & 8 mm

1.
(FI) Ihostanssi on standardoitu menetelmä ihobiopsian tekemiseen.

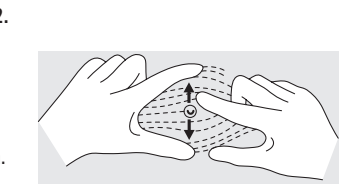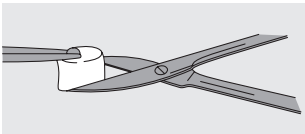

a.
(FI) Venytä ihoa ihopoimujen vähentämiseksi.

c.
(FI) Tartu varovasti kiinni ja nosta ihonäyte pienillä anatomisilla pinseteillä välttämällä näytteen rikkoutumista. Leikkaa tarvittaessa näyte irti saksilla tai veitsellä.

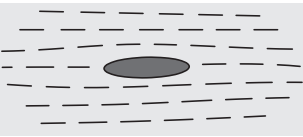

b.
(FI) Pidä stanssia peukalon ja etusormen välissä. Aseta stanssi ihon pinnalle ja kierrä myötäpäivään painaen samalla kohtalaisesti alaspäin.

d.
(FI) Alle 4 mm:n haavat sidotaan tai suljetaan hydrokolloiditeipillä. Yli 4 mm:n mittaiset haavat ommellaan, suljetaan hakasilla tai liimanauhalla kliinisesti sopivimmalla tavalla.



(FI) Steriloinut etyleenioksidilla:
sfm medical devices GmbH, Brückenstrasse 5, D-63607 Wächtersbach.



GSK Consumer Healthcare (GMDT)
Clocherane, Youghal Road,
Dungarvan,
Co. Waterford,
Ireland



4.
(FI) Ks. pakkauksesta tai kotelosta:



5.
(FI) GlaxoSmithKline Oy, Piispansilta/
Biskopsbro 9A,
PL/PB 24, 02230 Espoo/Esbo, SUOMI/
FINLAND.