

ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

**Balance 2-delige aluminium opvouwbare
massagetafel 186x60 cm**



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, gebouw DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026




Scan voor
verschillend
talen

Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen.
Lees de gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik en bewaar deze voor later.

De opvouwbare massagetafel BALANCE met aluminium poten is een praktische en veelzijdige oplossing, speciaal ontworpen voor het dagelijkse werk van masseurs, fysiotherapeuten en andere specialisten. De tweedelige constructie zorgt voor stabiliteit en comfort voor zowel de behandelaar als de patiënt. Dankzij het compacte
Dankzij zijn afmetingen, het lichte gewicht en de meegeleverde tas is hij ook uitermate geschikt voor mobiel gebruik – hij kan snel en gemakkelijk worden ingeklapt en meegenomen.

Technische gegevens	
Materiaal bekleding	Kunstleer
Vulling	Schuim
Maximaal draagvermogen	225 kg

Constructie van het apparaat:

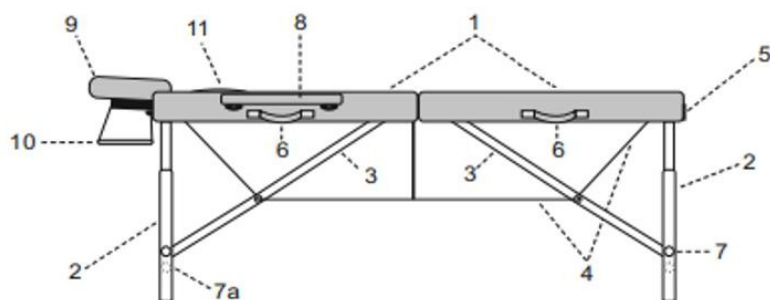

1. Tafelbladen
2. Poten
3. Steunen voor het tafelblad
4. Kabelspanning
5. Kofferslot
6. Transportgrepen
7. Schroeven / pennen voor hoogteverstelling 7a. Extra schroeven
8. Armsteunen
9. Hoofdsteen
10. Armsteun
11. Afdekkapje voor gezichtsopening

Montagehandleiding

1. De opgevouwen tafel lijkt op een koffer. Open de ritsen en klap de tafelbladen open
2. Haal de accessoires eruit (armleuningen, hoofdsteen en schouderplank)
3. Klap de poten aan de buitenkant van de tafel uit



4. Zet de tafel op de poten en druk hem stevig aan op de verbindingpunten van de tafelbladen
5. Controleer de spanning van de kabel
6. Stel de gewenste hoogte van het tafelblad in volgens de onderstaande instructies
7. Schuif de armleuningen in de openingen aan de zijkant van de tafel

8. Bevestig het kussen aan het hoofdeinde met klittenband en schuif het hoofdeinde vervolgens in de openingen aan de bovenkant van het bed. Gebruik de vergrendeling om het hoofdeinde in de gewenste positie vast te zetten.



De schouderplank kan op twee manieren worden bevestigd

Hoogteverstelling:

1	2	3	Tafels	Beschrijving van de werkzaamheden
			Houten	1. Draai de schroeven los waarmee de steunen aan de tafelpoten zijn bevestigd. 2. Stel de steunen in op de door u gewenste hoogte. 3. Draai de schroeven vast.
			Aluminium	1. Druk de vergrendelingspen in. 2. Zet de steun voor het werkblad in de gewenste positie. 3. Pas de opening aan de pen aan.


Let op

- Controleer voordat u de patiënt op de tafel legt of de buitenste poten correct zijn geplaatst en of de kabels in goede staat verkeren en goed zijn gespannen.
- Het maximale draagvermogen van de massagetafel bedraagt 225 kg.

Aanbevelingen:

1. De tafel is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
2. Het is verboden de positie van de tafel te veranderen wanneer deze belast is.
3. Het is verboden om met een ruk op de tafel te springen, te gaan zitten, te knielen of direct tegen de hoofdsteen en de armleuningen te leunen.
4. De tafel mag uitsluitend in ingeklapte toestand en met vergrendeld slot worden vervoerd.
5. Let bij het inklappen van de tafel op de plaatsing van de koorden. De koorden mogen niet bekneld raken.
6. De tafel moet worden gebruikt en opgeborgen uit de buurt van directe bronnen van vuur en warmte.
7. Bij correct gebruik gaat de tafel jarenlang mee zonder defecten.
8. Schade die ontstaat door het niet opvolgen van bovenstaande aanwijzingen vormt geen grond voor een klacht.

Afmetingen van het apparaat

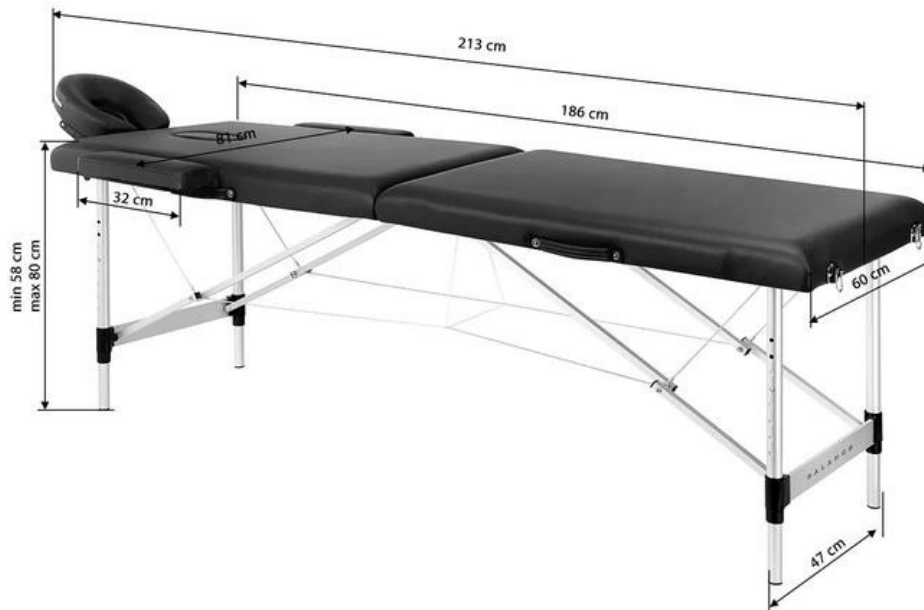

Afmetingen in opgevouwen toestand 93 x 60 x 15 cm

Reiniging en onderhoud:

Om het product in goede staat te houden en een zo lang mogelijke levensduur te garanderen, dient u het regelmatig te reinigen en te onderhouden.

- Oppervlak van het bed – gebruik een schone, zachte doek. U kunt een kleine hoeveelheid speciaal reinigings- en impregneermiddel voor kunstleer gebruiken.
- Aluminium onderdelen – afnemen met een vochtige doek.

Veiligheidsmaatregelen:

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Door het apparaat uitsluitend door gekwalificeerd schoonheidsspecialisten te laten bedienen, worden ongewenste effecten tijdens de behandeling voorkomen.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd en er mogen geen pogingen worden ondernomen om het voor andere doeleinden te gebruiken dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een medewerker van een erkende servicepartner (het bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd of bediend in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Sp. z o.o. in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgevallen of de behuizing is beschadigd.
5. Leg geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het gebruik van het apparaat.
7. Plaats geen vreemde voorwerpen in het apparaat. Mocht er toch een vreemd voorwerp in terechtkomen, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Bij een val kan het apparaat beschadigd raken.

9. Om de opgegeven levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een minuut te wachten voordat u de aan/uit-knop opnieuw indrukt (tussen het in- en uitschakelen en vice versa).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico op een onjuiste werking van het apparaat, beschadiging of zelfs brand.

LET OP

1. Neem bij beschadiging van het netsnoer of andere storingen contact op met een erkende reparateur – zo voorkomt u gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud, door personen met beperkte fysieke of mentale capaciteiten, en door personen die niet bekend zijn met de werking van dit apparaat, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het juiste en veilige gebruik en de daarmee samenhangende risico's begrijpen.
3. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen in de buurt zijn die onvoldoende kennis hebben over het gebruik ervan.
4. Het apparaat is niet bedoeld als speelgoed voor kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik van of contact met het kan een risico voor de gezondheid vormen of tot de dood leiden; gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen.

Afvoer van het apparaat



Ter bescherming van het milieu en in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten afgedankte elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Houd u aan de voorschriften voor het weggooien van dit soort apparatuur en gooi deze niet weg bij het huishoudelijk afval.

Aan het einde van hun levensduur bevatten deze apparaten nog steeds waardevolle, recyclebare onderdelen. Breng ze daarom voor recycling naar de juiste inzamelpunten of naar ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Opslag en transport

Het apparaat moet worden vervoerd bij een temperatuur tussen $(-20\text{ }^{\circ}\text{C})$ en $(+40\text{ }^{\circ}\text{C})$, uitsluitend in de originele verpakking. Het moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%. Bedrijfstemperatuur van $(+10\text{ }^{\circ}\text{C})$ tot $(+40\text{ }^{\circ}\text{C})$. Tijdens processen Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of laten vallen, noch worden blootgesteld aan mechanische schokken of weersinvloeden.