

GARANZIA

Il prodotto è garantito 2 ANNI dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato. Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare il prodotto munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

The product has 2-YEAR warranty from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals. In case you need to get the product repaired and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.



CERTIFICATO DI GARANZIA



Prodotto / Product _____


Acquistato in data / Purchasing date _____

Rivenditore / Authorized dealer _____

Via / Street _____ Località / Place _____

Venduto a / Sold to _____

Via / Street _____ Località / Place _____

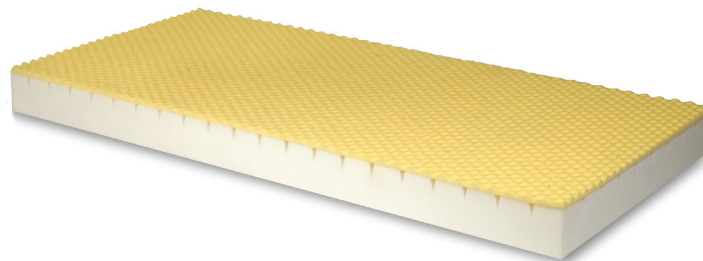

REF **ST728**



**MATERASSO IN POLIURETANO BICOMPONENTE
A SEZIONE UNICA FORATO E BUGNATO
MANUALE D'ISTRUZIONI**

**POLYURETHANE TWO-COMPONENTS MATTRESS,
ONE SECTION PERFORATED AND RUSTICATED
USER'S MANUAL**

MA ST728 01 A



MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codice ST728

Caratteristiche:

Grazie per aver acquistato il materasso in poliuretano **"LEVITAS"** by Moretti. Il materasso è forato, ha la base portante in poliuretano espanso densità 30 kg al m³ e uno strato superiore bugnato in schiuma viscoelastica a bassa resilienza densità 50. Non è foderato. (**Fodera optional codice: ST760 o ST761**)

- **ST728** _____ cm 190x85x14h - 7,2kg
Peso max. supportato 120kg
Realizzato a sezione unica

Manutenzione e pulizia:

I materassi **"LEVITAS"** in poliuretano o materiale viscoelastico possono essere autoclavati con vapore acqueo saturo a temperatura max 100° per un massimo di 10 minuti. In alternativa può essere usato un getto d'acqua ad alta pressione come un idropulitrice, con l'aggiunta di un detergente neutro. L'acqua usata per il lavaggio deve essere fatta fuoriuscire completamente dal materasso. Ideale sarebbe utilizzare una procedura di rullaggio. Successivamente far asciugare il materasso per 48 ore tenendolo lontano sia dai raggi del sole che da fonti di calore.

Avvertenze:

Si consiglia l'uso ad un solo utente.
Utilizzare e conservare in posizione orizzontale.
Il materasso deve essere conservato e utilizzato lontano da fiamme libere e fonti di calore.
Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo.

Medical Device Class I
Directive 93/42 EEC

Code ST728

Technical features:

Thank you for purchasing the polyurethane 2 components mattress **"LEVITAS"** by Moretti. The base is made of expanded polyurethane (density 30kg m³). The upper part is perforated and rusticated and it's made of viscoelastic foam (low resilience, density 50 kg m³). Without cover. (**The cover is optional: code ST760 - ST761**)

- **ST728** _____ cm 190X85X14h - 7,2kg
Max loading weight 120kg
Made in one section

Cleaning:

"LEVITAS" mattress in polyurethane or viscoelastic material can be autoclaved 100° for a maximum of 10 minutes. Alternatively you can use a high pressure water jet (like a pressure water machine) with a neutral soap. The ideal solution could be an air centrifugation system, to allow the used water to weep away completely from the mattress. Finally dry for 48 hours far from sun rays and warmth source.

Warning:

We suggest the use of the mattress one person at a time. Use and keep the mattress in a horizontal position, away from fire and from heat source. The device has to be sanitized before the use of another patient. There aren't known side effects.