

ERRATA CORRIGE

(inerente all'adeguamento alla norma EN 60601-1:2006)


Mod. TABITHERMAE

AVVERTENZE IMPORTANTI




- Precedentemente al primo uso, e periodicamente durante la vita del prodotto, controllate il cavo di alimentazione per accertarvi che non vi siano danni; se risultasse danneggiato, non inserite la spina e portate immediatamente il prodotto ad un centro di assistenza autorizzato FLAEM o dal Vs. rivenditore di fiducia.
- Alcuni componenti dell'apparecchio hanno dimensioni tanto piccole da poter essere inghiottite dai bambini; conservate quindi l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Tenete sempre il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Non maneggiate l'apparecchio con le mani bagnate. Non usate l'apparecchio in ambienti umidi (ad esempio mentre si fa il bagno o la doccia). Non immergete l'apparecchio nell'acqua; se ciò accadesse staccate immediatamente la spina. Non estraete né toccate l'apparecchio immerso nell'acqua, disinserite prima la spina. Portatelo immediatamente ad un centro di assistenza autorizzato FLAEM o dal Vs. rivenditore di fiducia.
- Non esponete l'apparecchio a temperature particolarmente estreme.
- Non posizionate l'apparecchio vicino a fonti di calore, alla luce del sole o in ambienti troppo caldi.
- Le riparazioni devono essere effettuate solo da personale autorizzato FLAEM. Riparazioni non autorizzate annullano la garanzia e possono rappresentare un pericolo per l'utilizzatore.
- **ATTENZIONE: Non modificare questo apparecchio senza l'autorizzazione del fabbricante**

Pag. 1 - LA DOTAZIONE STANDARD DELL'APPARECCHIO COMPRENDE:

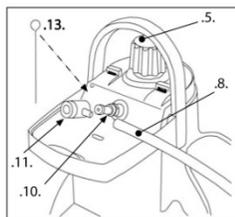


1. Maniglia
2. Coperchio Posteriore
3. Coperchio Anteriore
4. Interruttore luminoso
5. Tappo con valvola di sicurezza
6. Vaschetta di recupero acqua esausta
7. Imbuto
8. Tubo
9. Bocchettone
- 9a. Diaframma
10. Ugello Inalatore
11. Connettore Ugello-Tubo
13. Spillo Pulizia Ugello
14. Filtro Aspirazione Acqua
15. Tappo Bottiglia
16. Vano Porta Bottiglia

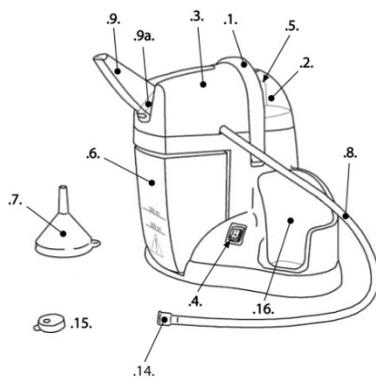


Pag. 3 - PULIZIA

4.10 Togliete il coperchio anteriore (.3.) utilizzando una moneta, spingendola verso l'alto come da disegno (fig.10)

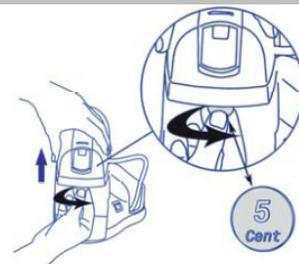

4.14 Smontate l'ugello (.10.) svitandolo in senso antiorario come da disegno (fig.12)

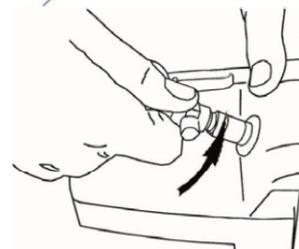

Pag. 5 - RICAMBI

Descrizione

- Ugello Inalatore (completo di OR)
- Connettore Ugello-Tubo
- Spillo Pulizia Ugello
- Filtro Aspirazione Acqua

Codice

- 14706
- 08467
- 08533
- 08476

Descrizione

- Tappo Bottiglia
- Imbuto
- Vaschetta di recupero
- Tubo

Codice

- 08968
- 08924
- 08465A0
- 02115

CARATTERISTICHE TECNICHE

Omologazioni di sicurezza:



PARTI APPLICATE

Parti applicate di tipo B sono: Nessuna



Attenzione controllare le istruzioni per l'uso



Parte applicata di tipo B



E' vietato utilizzare l'apparecchio mentre si fa il bagno o la doccia



Omologazione TUV rif. EN 60601-1 3° Ed.

COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA

Questo apparecchio è stato studiato per soddisfare i requisiti attualmente richiesti per la compatibilità elettromagnetica (EN 60 601-1-2:2007). I dispositivi elettromedicali richiedono particolare cura, in fase di installazione ed utilizzo, relativamente ai requisiti EMC, si richiede quindi che essi vengano installati e/o utilizzati in accordo a quanto specificato dal costruttore. Rischio di potenziale interferenze elettromagnetiche con altri dispositivi, in particolare con altri dispositivi di analisi e trattamento. I dispositivi di radio e telecomunicazione mobili o portatili RF (telefoni cellulari o connessioni wireless) potrebbero interferire con il funzionamento dei dispositivi elettromedicali. Per ulteriori informazioni contattate il Numero Verde Flaem 800-236622 e/o visitate il sito internet www.flaemnuova.it. Flaem si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto senza alcun preavviso.

ERRATA CORRIGE

(inherent adaptation to EN 60601-1:2006)


Mod. TABITHERMAE

IMPORTANT SAFEGUARDS




- Before using the unit for the first time, and periodically throughout its life, check the power supply cord for any damage; if you detect any damage, do not plug it in. Take the appliance immediately to an authorised FLAEM service centre or your dealer.
- Several parts of the device are small enough to be swallowed by children; therefore keep the device out of reach of children.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not handle the unit with wet hands. Do not use the device in humid environments (e.g. while taking a bath or shower). Do not immerse the device in water; should this accidentally occur, unplug the device immediately. Do not remove or touch the device immersed in water before pulling out the plug. Take the device immediately to an authorized service center or to your local dealer.
- Do not expose the device to high temperatures.
- Do not put the device near heat sources, direct sunlight, or in hot environments.
- Repairs must be performed by authorized personnel only. Any unauthorized repairs will void the warranty and may pose a safety hazard for the user.
- **WARNING: Do not modify this equipment without authorization of the manufacturer**

Pag.6 – THE STANDARD COMPONENTS AND ACCESSORIES OF THE UNIT INCLUDED:

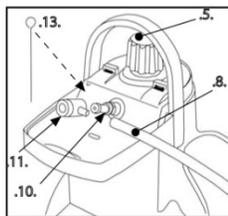


- .1. Handle
- .2. Rear cover
- .3. Front cover
- .4. Lighted on/off switch
- .5. Cap with safety valve
- .6. Used water collection tray
- .7. Funnel
- .8. Hose
- .9. Delivery outlet
- .9a. Diaphragm
- .10. Inhaler nozzle
- .11. Nozzle-hose connector
- .13. Nozzle cleaning pin
- .14. Water intake filter
- .15. Bottle cap
- .16. Bottle housing compartment

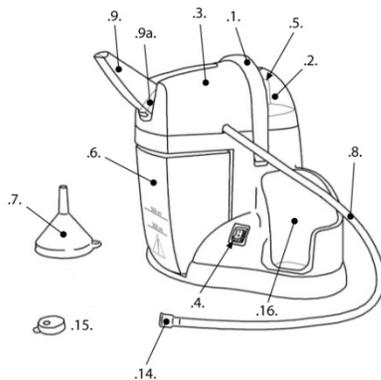

Pag.8– CLEANING

4.10 Remove the front cover (.3.) using a coin, and pushing upward as shown in the picture (fig.10)

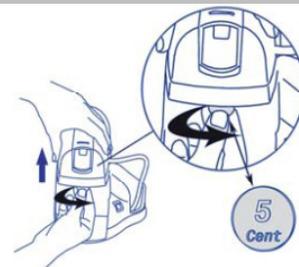

4.14 Unscrew the nozzle (.10.) by turning it anticlockwise as shown in the picture (fig.12)



Pag. 10 – SPARE PARTS

Description	Code	Description	Code
- Inhaler Nozzle (complete with OR)	14706	- Bottle Cap	08968
- Nozzle-Hose connector	08467	- Funnel	08924
- Nozzle Cleaning Pin	08533	- Collection Tray	08465A0
- Water Intake Filter	08476	- Hose	02115

TECHNICAL DATA

Safety Certifications:



Type B applied parts are: none

SIMBOLOGIE



Warning: follow the operating instructions



Type B applied part



Do not use device while taking a bath or shower



TUV Certification
ref. EN 60601-1 3rd Ed.

ELECTROMAGNET COMPATIBILITY

This device has been designed to meet the current requirements for electromagnetic compatibility (EN 60 601-1-2:2007).- Electromedical devices require special care during installation and use, with respect to EMC requirements It is therefore required that they be installed and/or used according to the manufacturer's specification. Potential risk of electromagnetic interference with other devices, in particular with other devices for analysis and treatment I Radio and mobile or portable RF communications devices (mobile phones or wireless connections) may interfere with the operation of electromedical devices For additional information please contact Flaem at the toll free number 800-236622 and/or visit www.flaemnuova.it. The Manufacturer reserves the right to make technical and functional changes to the product without notice.