

## CARROZZINA KOMETA modello “SIMPLY”

### SCHEMA TECNICA

**PRODUTTORE:** MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5 - 20020 ARESE (MI)

**DESCRIZIONE:** CARROZZINA LEGGERA KOMETA mod. “SIMPLY”

**CODICE ISO:** 12.22.03.006

**REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -**

**CND:** Y122106

**856808 Nr: 2190146/R 856816 Nr: 2190153/R**

**856811 Nr: 2190151/R 856818 Nr: 2190154/R**

**856813 Nr: 2190152/R 856821 Nr: 2190155/R**

**CODICE PRODOTTO      LARGHEZZA SEDUTA**

**856808                      38 cm**

**856811                      41 cm**

**856813                      43 cm**

**856816                      46 cm**

**856818                      48 cm**

**856821                      51 cm**

### DESCRIZIONE

Carrozzina leggera in lega di alluminio anti-corrosione, indicata per persone con disabilità funzionale, per utilizzo interno ed esterno.

### CARATTERISTICHE


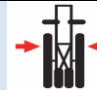
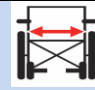





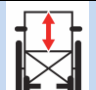


- Struttura a doppia crociera, in lega di alluminio anticorrosione, ad alta resistenza, leggera
- Pieghevole
- Braccioli estraibili e regolabili in altezza in 5 posizioni
- Ruote posteriori ad estrazione rapida
- Regolazione delle ruote posteriori e anteriori in più posizioni
- Forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile
- Schienale tensionabile a 5 fasce, regolabile in altezza da cm 36 a cm 46, ogni 2 cm, con maniglie di spinta
- Maniglie di spinta regolabili in altezza, da 36 cm a 46 cm, un foro ogni 2 cm
- Tela sedile imbottita con viti di fissaggio a testa piatta, per evitare traumi da contatto
- Tela sedile e schienale ignifughe (**fuoco ritardante**), lavabili e sanificabili
- Piatto pedana separato con regolazione della flessione-estensione
- Gruppo pedane regolabili in altezza, ribaltabili, estraibili
- Ruotine per ascensore/passaggi stretti
- Dotate di freni di stazionamento
- Ruote posteriori da 24" x 1", pneumatiche
- Due ruote piccole piroettanti (da 6", PU soft) in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione
- Portata massima kg. 130



**Il prodotto è adatto per essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione**

**COLORE :** Rosso brillante

### SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza Totale	Larghezza Chiusa	Larghezza sedile	Altezza Braccioli	Altezza sedile	Altezza Totale	Lunghezza Totale	Profondità Seduta	Altezza Schienale	Peso	Portata Massima
										
57,5	32	38	Da cm 20 a cm 30	49	Da cm 89 a cm 99	97	Cm 42	Da cm 36 a cm 46	13,50	130
60	32	41		49		97			14,00	
62,5	32	43		49		97			14,50	
65	32	46		49		97			15,00	
67,5	32	48		49		97			16,00	
70	32	51		49		97			16,15	

### OPTIONAL

- Gruppo pedane estraibili, regolabili ed elevabili in altezza (Rif. Cod. ISO 12.24.03.109)
- Sistema anti-ribaltamento
- Prolunga schienale
- Tavolino con incavo avvolgente

### CONFORMITA'

La carrozzina è stata sottoposta a test e controlli di qualità, vi è quindi la certezza che risponde alle norme di sicurezza previste.

Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.

