



FASTECG

SCHEMA TECNICA

(pediatrica)




FAST ECG è un dispositivo di posizionamento rapido per elettrodi ECG precordiali. Il supporto, realizzato con una miscela di gomma siliconica per applicazioni biomedicali, è flessibile ed estensibile per adattare la posizione degli elettrodi alle diverse dimensioni toraciche sia maschili che femminili e per lo stesso motivo gli elettrodi hanno diverse dimensioni. Gli elettrodi sono realizzati in ottone e rivestiti con Ag attraverso un processo di galvanizzazione. Il fissaggio del dispositivo è assicurato da due coppette ad aspirazione che garantiscono il mantenimento della posizione corretta per tutta la durata della registrazione elettrocardiografica.




TERMINALE BANANA 4mm

L'elettrodo è progettato con un foro da 4 mm che permette di inserire il terminale a banana del cavo del paziente. Successivamente, il connettore viene fissato tramite una vite di serraggio.

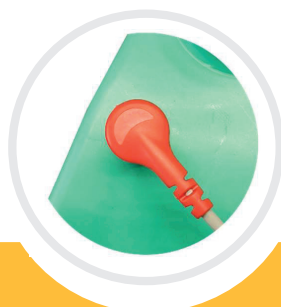

TERMINALE A BOTTONE

La testa dell'elettrodo è progettata per poter collegare i cavi con terminali snap a bottone, assicurando un contatto sicuro e stabile con l'elettrodo.

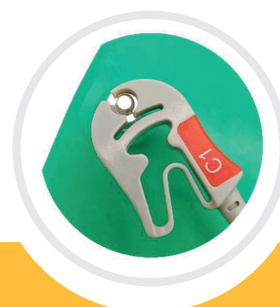

TERMINALE A PINZETTA

La speciale testa dell'elettrodo permette il collegamento del cavo paziente con terminale a pinzetta, garantendo una connessione sicura e affidabile.

ats





CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE MODELLO	01969
DIMENSIONI	Larghezza 39 cm – Profondità 15 cm
MATERIALE ELETTRODO E VITE	Ottone con trattamento Ag
MATERIALE COPPA	Ottone con trattamento Ag
MATERIALE SUPPORTO	Gomma siliconica per applicazioni biomedicali
MATERIALE POMPETTA	Plastico (PVC medical grade)
DIAMETRO POMPETTA	33mm
DIAMETRO ELETTRODO	14,7mm
DIAMETRO COPPA	30mm
SPESSORE ELETTRODO	4mm
CONNESSIONE	UNIVERSALE – Connettore banana 4mm, pinzetta, bottone
CONFORMITÀ ANATOMICA	Diametro torace da 53cm a 74mm
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA	Regolamento (UE) 2017/745. Dispositivo medico in classe I
UDI-DI di Base	805666908C020501VS
UDI / GTIN	08056669080015
RDM	2572579
CONFEZIONE DI VENDITA	1 pezzo
DOTAZIONE	FAST ECG con 6 elettrodi precordiali e 2 coppe di fissaggio a pompetta, Borsello per il trasporto, Spray conduttivo per ECG, Fascetta con velcro, Manuale d'uso
IMMAGAZZINAMENTO	Temperatura massima: 0°C ÷ +50°C - Umidità relativa: 20% ÷ 80%
SCADENZA PRODOTTO	Non soggetto a scadenza
SCADENZA SPRAY CONDUTTIVO	36 mesi dalla data di fabbricazione

RAM APPARECCHI MEDICALI s.r.l – via Casaregis 19/25 R – 16129 Genova – Italy
Tel. +39.010.5761476 – Fax +39.010.580683 C.F. - P.IVA 01769610997 - REA: 434326
www.elettromedicali.it

