

TECARTERAPIA PROFESSIONALE CR200

• 28364 TECARTERAPIA CR200 con 2 sonde

La diatermia, conosciuta come Tecarterapia (acronimo di Trasferimento Energetico Capacitivo e Resistivo), è una terapia che stimola i naturali processi di riparazione dell'organismo, abbreviando i tempi di recupero motorio. La diatermia, attraverso l'interazione energia elettromagnetica-tessuto, produce un aumento della temperatura che avviene all'interno dei tessuti in maniera uniforme e controllata.

Tale interazione dà luogo alla comparsa di un flusso ionico con una microiperemia che favorisce il rilascio di sostanze endogene (soprattutto cortisolo ed endorfine) per ridurre il dolore, gli edemi e le infiammazioni.

Il nuovo CR200 capacitivo/resistivo è un dispositivo moderno e molto performante, facilmente utilizzabile dai professionisti. I programmi preimpostati facilitano l'uso del dispositivo.

Inoltre il dispositivo può impostare i parametri (alimentazione, durata della terapia, modalità resistiva/capacitiva) secondo i bisogni terapeutici.



Permette di memorizzare programmi personalizzati.

In questo modo i protocolli dei pazienti sono facilmente consultabili da parte dei terapeuti in qualsiasi momento. Dotato di un ampio display grafico per visualizzare i parametri terapeutici e le diverse modalità di funzionamento.

Lingua del software selezionabile (GB, IT, ES).

• 28361 SONDA RESISTIVA - ricambio

• 28362 SONDA CAPACITIVA - ricambio

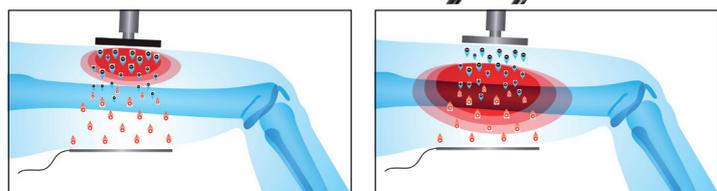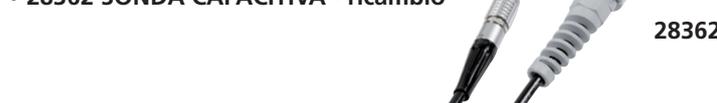

Modalità capacitiva

Elettrodo rivestito con materiale ceramico (mobile) e piastra di ritorno (fissa).

Particolarmente indicata per i tessuti molli (massa muscolare e sistema linfatico/vascolare). Vantaggi: intervento specifico, facile controllo dell'area trattata.

Modalità resistiva

Elettrodo non isolato (mobile) e piastra di ritorno (fissa). Particolarmente indicata per i tessuti con maggiore resistenza (ossa, articolazioni, tendini, legamenti, cartilagini).

Vantaggi: alto livello di diatermia; disturbi cronici con fibrosi e degenerazione.

DOTAZIONE STANDARD

2 sonde multifunzionali per modalità capacitativa e resistiva
2 elettrodi Ø 35 mm (1 resistivo + 1 capacitivo) con 9,61 cm² di effettiva area di funzionamento
2 elettrodi Ø 60 mm (1 resistivo + 1 capacitivo) con 28,26 cm² di effettiva area di funzionamento
2 supporti integrati per sonde
1 piastra di acciaio
Flacone di crema conduttiva 1 kg
Cavo di alimentazione
Manuale utente: GB, IT (ES, FR su richiesta)



APPLICAZIONI

Patologie muscolo-scheletriche
Linfedema

Dolori acuti e cronici
Patologie osteoarticolari

24 PROGRAMMI DI RIABILITAZIONE
Arto fantasma, artrosi ginocchio, artrosinovite, borsite, cervicgia, colpo di frusta, condropatia, contrattura muscolare, contusione, stiramento muscolare, distorsione, distrazione muscolare, dolori articolari, edema, epicondilita, epirocleite, LCA, linfedema, lombalgia, meniscopatia, strappo

muscolare, tendinite acuta, tendinite cronica, tendinopatia cuffia rotatori
10 PROGRAMMI SPORT
contrattura muscolare, contusione, defaticamento muscolare, distorsione, ematoma, lesione tendinea, massaggio superficiale, massaggio profondo, stiramento muscolare, strappo muscolare
10 MEMORIE LIBERE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energia max: 160 W (carico 100 ohm)
Frequenza portante: 500 kHz
Display grafico touch screen 7"

Potenza regolabile: 0-100%
Programmi preimpostati, memorie libere

CREME CONDUTTIVE

• 28345 CREMA CONDUTTIVA DIATER 1 I - base neutra

• 28346 CREMA CONDUTTIVA DIATER 1 I - arnica

• 28347 CREMA CONDUTTIVA DIATER 1 I - acido ialuronico

Creme conduttive essenziali, semplici ed efficaci. Ricche di ingredienti attivi riconosciuti nelle terapie muscoloscheletriche, contribuiscono al recupero funzionale degli atleti e ai trattamenti estetici dell'epidermide e del derma. Eccezionale assorbimento e potenziamento delle terapie concentrati sulla porzione di tessuto trattato, con stabilità ed efficacia elevate. Senza parabeni o petrolati.

Crema conduttiva a base neutra: idrata e protegge i tessuti; ideale per essere miscelata.

Crema conduttiva all'arnica montana: decongestiona e protegge i tessuti. Per infiammazioni acute e croniche di tessuti o articolazioni e per lipodistrofia.

Crema conduttiva all'acido ialuronico: restituisce l'equilibrio idrico ai tessuti. Protegge le cartilagini, combatte la flogosi e le perdite di tessuto a seguito di traumi. Trattamento di cicatrici, ipotonia e disturbi postoperatori. Ideale per mobilizzazioni passive.

Le creme sono contenute in recipienti di PET termoprotetti e fotoprotetti, con tappo, sotto-tappo e dispenser.

Solo uso professionale in vari settori: fisioterapia, fisioterapia,

chirurgia plastica, estetica, terapia ortodermica, preparazione atletica, massaggio e podologia.

Etichetta in: GB, IT, FR, ES.

• 28348 TAPPO CON POMPA DOSATRICE MADE IN ITALY

