

PINZE, FORBICI E CAVI MONOPOLARI



Pinze e forbici monopolari con attacco standard da 4 mm, utilizzabili con gli elettrobisturi GIMA, LED, ERBE e altre marche.

| Codice GIMA | STRUMENTI MONOPOLARI ISOLATI |
|-------------|--|
| 30610 | Cavo monopolare - pin 4 mm - 3 m |
| 30611 | Pinza monopolare retta Mc Indoe - 15 cm (6") |
| 30612 | Pinza monopolare a baionetta - 20 cm (7 1/2") |
| 30613 | Forbici monopolari rette - 18 cm (7") |
| 30614 | Forbici monopolari Metzenbaum rette - 18 cm (7") |
| 30615 | Forbici monopolari Metzenbaum curve - 18 cm (7") |

PLACCHE UNIVERSALI 3M CON ANELLO DI SICUREZZA

- 30496 3M 9160 PLACCA BIPARTITA - conf. da 100
 - 30497 3M 9160F PLACCA BIPARTITA - conf. da 200 (40 buste da 5 pezzi)
 - 30498 3M 9165 PLACCA BIPARTITA - con cavo - confezione da 40
- Le placche universali di messa a terra 3M 9160 e 9165 sono dotate di una zona di conduzione di 15 pollici quadrati e sono equipaggiate con l'anello verde di sicurezza brevettato da 3M, che garantisce le stesse performance di piastre con una grandezza superiore del 33% nell'area di conduzione. L'anello verde consente l'uso per adulti e pediatrico. Completa

impermeabilità ai liquidi, supporto in tessuto non tessuto che permette un passaggio del calore del 25% più veloce rispetto alla schiuma. Utilizzabile per pazienti sia adulti che pediatrici e senza limiti di peso.



30496, 30497
(3M 9160)



30498
(3M 9165)

MANIPOLI PER AGHI ELETTROLISI


Accessori microchirurgia per tutti i Diatermo Gima e gli elettrodepilatori

- 30552 MANIPOLO per aghi elettrolisi
- 30415 MANIPOLO PROFESSIONALE per aghi elettrolisi



Spina a 1 pin (Ø 4mm) per i suddetti manipoli

AGHI BALLET STERILI MONOUSO PER ELETTROLISI

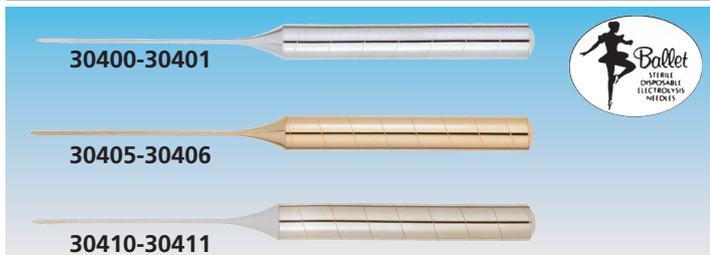

| Acciaio inox | Placcati oro | Isolati | AGHI PER ELETTROLISI - STERILI | Minimo vendita |
|--------------|--------------|---------|--------------------------------|----------------|
| 30400 | 30405 | 30410 | Ago K2 - 0,055 mm (0,002") | conf. da 50 |
| 30401 | 30406 | 30411 | Ago K3 - 0,075 mm (0,003") | conf. da 50 |

Aghi Ballet

Realizzati con una punta molto precisa, presentano una superficie lucida a specchio. La punta conica arrotondata assiste l'operatore nel localizzare l'apertura del follicolo e scivola agevolmente alla base stessa del follicolo.

Aghi in acciaio inox

Ideali per pazienti con cute sana e forte che risponde bene al trattamento di elettrolisi.

Aghi isolati

Consigliati per pazienti che presentano un'alta sensibilità ai disagi dell'elettrolisi.

Aghi placcati oro 24 carati

Per pazienti che hanno pelle sensibile e soffrono di allergie.



ELETTRODEPILATORE

• 28340 ELETTRODEPILATORE 400

Apparecchiatura per la depilazione definitiva con metodo termolitico. Attraverso l'introduzione di un ago, con corrente a radiofrequenza, nel follicolo dei peli si provoca il riscaldamento e la conseguente coagulazione della papilla. Integrato con componenti elettronici di elevata affidabilità, intensità RF regolabile in modo continuo e spia luminosa di funzionamento. Viene fornito completo di pedale, manipolo per depilazione, ago per depilazione con cavo di alimentazione (2 m).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Elettrodepilatore a radio frequenza: 1,9 ±10% MHz
 Modulazione: sinusoidale
 Potenza massima erogata: 7 ±2 Watt
 Dimensione: 260x265x110 mm Peso: 4 kg
 Tensione di funzionamento: 115/230 V - 50/60 Hz commutabile
 Norme: CEI 62-39 Classe: I-BF

• 30552 MANIPOLO PER DEPILAZIONE

• 30577 PEDALE STANDARD

