

LAMPADE INGRANDENTI A LED A LUCE FREDDA - 3 DIOTTRIE

GIMANORD PLUS

Questo modello presenta una lente di ingrandimento biconvessa in vetro ottico con Ø 120 mm. La luce a LED fredda consente l'uso prolungato senza causare problemi alla vista. Schermo in policarbonato per proteggere la sorgente luminosa. Adatta per dermatologia. Dispositivo medico di Classe I.

Design

Il nuovo design rende la lampada molto facile da usare e manovrare, con una rotazione aggiuntiva del riflettore.

Comando a sfioramento


L'intensità luminosa è regolabile dal 4% al 100% con un lieve tocco del pulsante.

Spine intercambiabili

Il trasformatore, integrato nella spina per un movimento più leggero e scorrevole del braccio, è dotato di spine intercambiabili (UK, US, EU).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intensità luminosa a 50 cm (Ec)	2.250 lux
Temperatura di colore	5.370 K
Indice di resa cromatica (CRI)	95 Ra
R9	≥90
Tensione di esercizio	100-240 V - 50/60 Hz
Potenza assorbita	16,5 W
Diametro testa della lampada	23 cm
Durata media	>60.000 ore
Norme	IEC-60601-1, IEC-60601-2-41, UE 2017/745

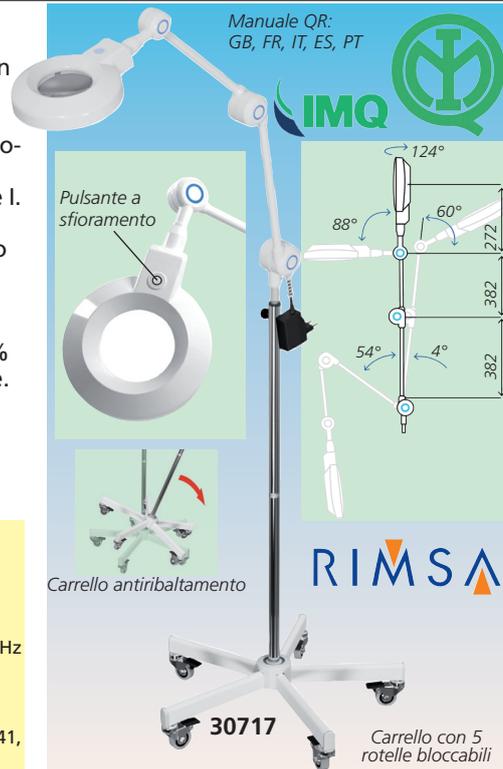

Lente d'ingrandimento
Ø 120 mm

30716
30717

Manuale QR:
GB, FR, IT, ES, PT

MADE IN ITALY

Codice GIMA **LAMPADE LED INGRANDENTI**

30716 GIMANORD PLUS da tavolo con morsetto
30717 GIMANORD PLUS su carrello

RICAMBI E SISTEMI DI FISSAGGIO

30720 Copertura plexiglass per 30716-9 - ricambio
30771 Copertura plexiglass per 30750-1* - ricambio
30769 Carrello - base Ø 61 cm - ricambio
30774 Connettore da parete - opzionale
*Vecchi modelli



Morsetto per collegamento al tavolo di 30716
Collegamento al carrello 30717
Morsetto per parete

LAMPADE INGRANDENTI A LED - 5 DIOTTRIE

• 30737 LAMPADA INGRANDENTE A LED LUPA - carrello

• 30739 LAMPADA INGRANDENTE A LED LUPA - da tavolo con morsetto

Lampade a LED, di concezione intelligente con luce fredda e ingrandimento di 5 diottrie. Generano una luce senza ombre. La base con 5 rotelle e il braccio articolato facilitano lo spostamento.

Manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE. Dispositivo medico Classe I.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo illuminazione:	60 LED - HF 6 W
Diottrie:	5
Lente:	Ø 12,7 cm
Temperatura di colore:	6.500 °K
Tensione di esercizio:	110-230 V - 50/60 Hz
Classe I	
Marchi:	93/42/CEE
Durata lampada:	40.000 ore



LAMPADA INGRANDENTE A LED - 3 DIOTTRIE

• 30736 LAMPADA INGRANDENTE DERMALED

Lampada a LED con luce fredda, lente d'ingrandimento 3 diottrie e regolazione della luminosità. Disponibile con carrello molto stabile a 5 rotelle e un braccio articolato per facilitare i movimenti e il fissaggio della lampada.

Manuale in GB, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo illuminazione:	LED
Tensione:	7 W
Diottrie:	3 (vetro grande)
Temperatura di colore:	7.500-9.500 °K
Intensità luminosa a 20 cm:	2.400 lux
Tensione di esercizio:	100-240 V - 50/60 Hz
Peso netto/lordo:	12,8-15 kg

