

POLTRONA ELEVABILE ELETTRICA

Ref. Alba



Il colore del modello nella foto è puramente indicativo

Descrizione

Poltrona elevabile dal design classico, avvolgente e confortevole. Struttura in legno rivestito da uno strato di poliuretano e meccanica in metallo. Rivestimento in tessuti con trattamento antimacchia o ecopelle, disponibili in diversi colori (Vedi tabella colori). Poliuretano espanso ecologico a densità differenziata rivestito da una falda in Dacron.

Il meccanismo della poltrona a 4 motori permette la regolazione separata delle varie movimentazioni, all'occorrenza funzionali ai fini ortopedico-sanitari, utili soprattutto quando si hanno esigenze fisiche che obbligano a restare seduti per lunghi periodi. Il sistema consente infatti, oltre alle classiche posizioni, di alzare la poltrona di circa 20 cm, conservando la seduta parallela al pavimento, oppure di bascularla spostando così i punti di pressione corporei e ottenendo un'azione preventiva del decubito. La poltrona è dotata di 4 ruote piroettanti, di cui 2 con freno, che permettono di spostarla facilmente da una stanza all'altra e grazie ai braccioli amovibili, sono facilitati i trasferimenti, l'avvicinamento al tavolo o l'utilizzo del tavolino accessorio.


Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Destinazione d'uso

Ausilio indicato per persone con limitate capacità motorie.

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y123606	
Identificativo di Registrazione	1705211	
Codice Classificazione ISO	nd	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura C.E.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(Nome e numero dell'Ente)	n/a	
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Metodo di sterilizzazione	n/a	
Periodo di validità	n/a	
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2020 (INTERMED)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	SPAZIORELAX spa	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche e Ingombri

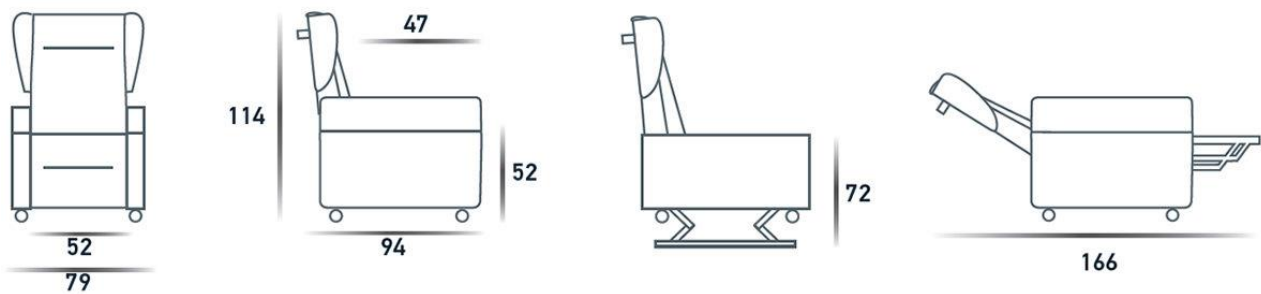

Modello	Peso	Portata
Alba	48 Kg	150 Kg

Regolazioni



La meccanica a 4 motori è normalmente rinforzata per supportare un peso fino a 150 Kg

1. Regolazione schienale indipendente
2. Regolazione alza-gambe indipendente
3. Regolazione combinata schienale alza-gambe
4. Alza-persona
5. Basculamento
6. Sollevamento

Accessori

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
ALBA-AB	Batteria ricaricabile	1
Tav	Tavolino (solo per poltrone con braccioli amovibili)	1
ALBA BA-R	Braccioli amovibili	2

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
Alba*	Poltrona elevabile	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

*Poltrona nella configurazione di motori scelta

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	05/02/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.1	26/11/2020	Aggiornamento codici componenti

