

SPIROMETRO



UNA BOCCATA
D'ARIA FRESCA

SPIROLYSER® Q13®



**SCREENING PER DISTURBI
RESPIRATORI**

- ▶ Facile, moderno e veloce
- ▶ Sensore monouso tipo Fleisch
- ▶ Design "**Nessun contatto,
nessun rischio**":
 - nessuna calibrazione
 - nessuna disinfezione
 - nessuna contaminazione
crociata

CE
0459






FOCUS SULLA TECNOLOGIA

Da oltre 25 anni, FIM MEDICAL sceglie lo pneumotachografo di tipo Fleisch per progettare i suoi spirometri grazie alle qualità di riproduzione e precisione di misura. Una tecnologia brevettata per riprodurre la tecnica dei sensori in **versione monouso**.

DESIGN "NO CONTACT NO RISK"

Ogni sensore monouso **Qflow®** è confezionato singolarmente in una bustina pretagliata e stampata. **Grazie a un innovativo sistema di espulsione, il sensore utilizzato viene espulso dopo ogni test.** In questo modo, le mani dell'operatore non entrano mai in contatto diretto con il sensore.

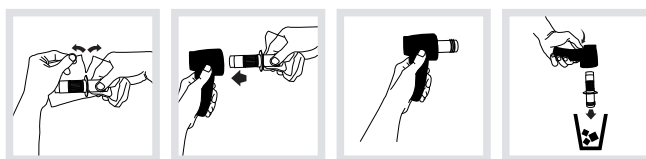

Lo **Spirolyser® Q13®** è uno spirometro di nuova generazione che **non richiede calibrazione o disinfezione**. I test di laboratorio eseguiti sul **Qflow®** dimostrano che la contaminazione incrociata tra i pazienti è priva di rischi al **99,999%**.

Lo **Spirolyser® Q13®** è uno spirometro computerizzato che utilizza sensori di tipo Fleisch monouso (tecnologia brevettata), destinato all'uso da parte di operatori sanitari. Il design, la tecnologia e l'ergonomia forniscono gli strumenti essenziali per misurare la capacità respiratoria nella medicina preventiva.

SPIROLYSER® SPIROMETER Q13®

IL +

- ▶ Test approfonditi disponibili: Capacità Vitale Lenta (SVC), Capacità Vitale Forzata (FVC) pre e post-medicazione, Ventilazione Volontaria Massima (MVV)
- ▶ Stazione meteo integrata misura temperatura, pressione e umidità
- ▶ Esportazioni e stampa test
- ▶ Confronto di test nel tempo
- ▶ Database sicuro
- ▶ Compatibilità con molti pacchetti software
- ▶ Divertenti video incentivanti
- ▶ Guida all'interpretazione dei risultati



L'85% dei pazienti ha consultato il proprio medico con sintomi respiratori indicativi di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) nei 5 anni precedenti la diagnosi.

COME DIAGNOSTICARE LA BPCO?
Dimostrando il "problema ventilatorio ostruttivo" attraverso una spirometria.



IL TUO DISTRIBUTORE

CENTRO APPARECCHI MEDICALI
FORNITURE E ASSISTENZA

RAM APPARECCHI MEDICALI s.r.l.
Dr. G. Zanetti
Via Casaregis 23 r
16129 GENOVA

Tel. 010.576.14.76
Fax 010.58.06.83
www.elettromedicali.it
ram@elettromedicali.it



ACCESSORI (inclusi con il dispositivo)
Borsa da viaggio

ALTRI ACCESSORI (non inclusi)

- Sensori Qflow Fleisch monouso
- Fermacapelli (confezione da 200)
- Siringa di calibrazione Hans Rudolph 3L Serie 5570

2
ANNI
GARANZIA
Q13®



51 rue Antoine Primat - CS 60194
69625 Villeurbanne Cedex France

Tel +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

CE
0459