

# OTOSCOPIO CHIRURGICO VETERINARIO RI-SCOPE® E SET

## • 80480 TESTINA OTOSCOPIO CHIRURGICO RI-SCOPE® 2,5V - 10541 - richiede 80488

- lente orientabile con ingrandimento 2,5 X  
- porta-speculum scanalato mobile, agganciabile in qualsiasi posizione

- design aperto per agevolare l'uso durante la visita e l'intervento chirurgico

- innesto a baionetta per aggancio rapido e sicuro al manico

- otoscopio chirurgico interamente in metallo per una lunga durata

- sostituzione rapida della lampadina frontale

## • 80483 SPECULUM RIUTILIZZABILE Ø 4 mm - 83 mm - 10881

## • 80485 SPECULUM RIUTILIZZABILE Ø 6 mm - 82 mm - 10882

## • 80487 SPECULUM RIUTILIZZABILE Ø 9,4 mm - 92 mm - 10884

- alta qualità, metallo cromato anti-corrosione

- superfici interne opache per ridurre il rischio di riflessi

- modello scanalato (solo 80487): guida ottimale dello strumento grazie ai bordi speciali sull'apertura

## • 80488 MANICO TIPO AA per 80480 - 10642

Adatto per 2 batterie AA (non incluse)

## OFTALMOSCOPIO RI-SCOPE® L (solo 80492, 80494)

- rotella di messa a fuoco con lenti correttive da 0 a +40 e da 0 a -35 diottrie

- rotella manuale di apertura, di facile utilizzo; semi-cerchio, spot piccolo/medio/grande, stellina di fissazione, fessura e filtro senza rosso, con effetto di potenziamento del contrasto.

Tutti i set sono forniti in astuccio robusto rinforzato in fibra di vetro.

80480+  
80487+  
80488



## • 80490 OTOSCOPIO VETERINARIO ALOGENO 2,5V manico AA - 3853

Otoscopio chirurgico Ri-scope®

Speculum in metallo, non scanalati, sterilizzabili:

- Ø 4 mm, lunghezza 83 mm

- Ø 5 mm, lunghezza 62 mm

- Ø 6 mm, lunghezza 82 mm

Speculum in metallo, scanalati, sterilizzabili:

- Ø 7,5 mm, lunghezza 68 mm

- Ø 9,4 mm, lunghezza 92 mm

1 lampadina di ricambio

lente orientabile con ingrandimento 2,5 X



80490

## • 80492 SET OTO-OFTALMOSCOPIO VETERINARIO ALOGENO 2,5V manico AA - 3861

Otoscopio chirurgico Ri-scope®, Oftalmoscopio Ri-scope® L1

Speculum in metallo, non scanalati, sterilizzabili:

- Ø 4 mm, lunghezza 83 mm

- Ø 5 mm, lunghezza 62 mm

- Ø 6 mm, lunghezza 82 mm

Speculum in metallo, scanalati, sterilizzabili:

- Ø 7,5 mm, lunghezza 68 mm

- Ø 9,4 mm, lunghezza 92 mm

2 lampadine di ricambio

lente orientabile con ingrandimento 2,5 X



80492

## • 80494 SET OTO-OFTALMOSCOPIO VETERINARIO DELUXE 2,5V manico AA - 3869

Otoscopio chirurgico Ri-scope®, Oftalmoscopio Ri-scope® L1

Abbassalingua Ri-scope® L, Speculum nasale Ri-scope® L

Speculum in metallo, non scanalati, sterilizzabili:

- Ø 4 mm, lunghezza 83 mm

- Ø 5 mm, lunghezza 62 mm

- Ø 6 mm, lunghezza 82 mm

Speculum in metallo, scanalati, sterilizzabili:

- Ø 7,5 mm, lunghezza 68 mm

- Ø 9,4 mm, lunghezza 92 mm

2 lampadine di ricambio


lente orientabile con ingrandimento 2,5 X



80494

# TERMOMETRO DIGITALE

80450

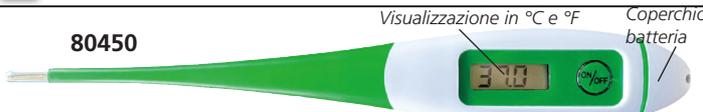

Visualizzazione in °C e °F

Coperchio batteria

## • 80450 TERMOMETRO VET DIGITALE

- punta flessibile, impermeabile

Dimensioni LCD 15x7 mm

Scatola e manuale multilingue:

GB, FR, IT, ES, PT, GR.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo misurazione: 32-42,9 °C

Accuratezza: ± 0,1 °C

Dimensioni: 138x21x10 mm

Alimentazione: batteria LR41 1,5V

Tempo misurazione: 60 sec.

# STETOSCOPIO VETERINARIO

LUNGHEZZA LIRA 90 CM

## • 32545 REGALITE VET - nero

Stetoscopio di alta qualità a padiglione singolo.

Padiglione cromato con archetto biauricolare a molla

interna "SUPERFLEX" e lira in PVC stampata in un unico

pezzo, lunga 90. Fornito in scatola deluxe, con olive

morbide di ricambio e membrana di ricambio.



CE

32545

# TERMOMETRO DIGITALE

## • 25588 TERMOMETRO VET RETTALE

Ergonomicamente corretto per gli animali. Regolazioni selezionabili per animali da compagnia, suini, bovini e altri animali.

Caratteristiche:

- temperatura istantanea in 16 secondi

- indicatore acustico

- display LCD e memoria

- spegnimento automatico dopo 10 minuti

- temperatura visualizzata in scala Fahrenheit e in scala Celsius

- affidabile, sicuro e facile da usare

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR.

MISURAZIONE IN 16 SECONDI



25588

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di misurazione: 32-42,9°C (89,6-109,2 °F)

Accuratezza: ± 0,1 °C (35-39°C)

Durata batteria: circa 5.000 letture

Dimensioni: 190x110x35 mm

Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5V

Tempo di misurazione: 16 sec.

# VISIOFOCUS® VET - BLUETOOTH

## • 80457 VISIOFOCUS® VET - Bluetooth

Può misurare la temperatura degli animali a distanza, senza contatto e in pochi secondi. Grazie al sistema di puntamento ottico, la temperatura viene misurata dall'occhio, con un sistema LED che indica la distanza di lettura corretta. La temperatura può essere misurata anche da retto, orecchio o gengiva. Il cappuccio incorporato evita l'ingresso di polvere e impurità.

Adattamento automatico all'ambiente: il software applica automaticamente un fattore di correzione in base alle condizioni ambientali, dopo almeno 3-5 minuti di permanenza in un locale. In alternativa, può essere eseguita una calibratura manuale (Manual Quick Calibration System, MQCS) in soli 3 secondi.

Adatto per tutti gli animali

Multifunzionale: può misurare anche la temperatura di oggetti, cibi, liquidi o altre superfici.

Sistema Bluetooth per collegamento con lo smartphone: la App VisioFocus Vet consente di selezionare l'animale appropriato e registrare numerosi dati.

Fornito con 4 batterie AAA.

80457



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo misurazione corpo: 32-43,5°C (89,6-110,3°F)

Intervallo misurazione generale: 1-80°C (33,8-176 °F)

Risoluzione (corpo - generale): 0,1°C (0,1°F)

Dimensioni: 144x43,5x21,5 mm (5,66x1,71x0,85") con cappuccio

Alimentazione: 4 batterie AAA - LR03

Durata batteria: circa 3 anni o 30.000 misurazioni

Tempo di misurazione: immediato

Distanza dall'animale\*: circa 6 cm (2,4 pollici)

\*Calcolata da un sistema di puntamento ottico