

SIGILLI IN PLASTICA CON INDICATORE DI VAPORE**PLASTIC SECURITY SEAL WITH STEAM INDICATOR****SCEAU DE SÉCURITÉ EN PLASTIQUE AVEC INDICATEUR DE VAPEUR****SELLO DE SEGURIDAD PLÁSTICO CON INDICADOR DE VAPOR****SELO DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO COM INDICADOR DE VAPOR****SIGILLARE DE SECURITATE DIN PLASTIC CU INDICATOR DE ABUR****MŰANYAG BIZTONSÁGI TÖMÍTÉS GŐZJELZŐVEL**

- Manuale d'uso e manutenzione
- Use and maintenance book
- Instructions de fonctionnement et entretien
- Manual de uso y mantenimiento

- Manual de uso e manutenção
- Manual de utilizare și întreținere
- Kezelési és karbantartási útmutató

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

CUIDADO: Os operadores devem ler e compreender este manual completamente antes de usar o produto.

ATENȚIE: Operatorii trebuie să citească și să înțeleagă complet acest manual înainte de a utiliza produsul.

VIGYÁZAT: A kezelőknek el kell olvasniuk és meg kell érteniük ezt a kézikönyvet a termék használatá előtt.



	REF
GIMA 37330	902.111.1000
GIMA 37332	902.112.1000
GIMA 37340	902.113.1000
GIMA 37341	902.115.1000
GIMA 37343	902.114.1000
GIMA 37344	902.116.1000



SP Medikal San Ltd. Sti
Yenidoğan Mahallesi, Erciyes Sokak No:16/2
34035, Bayrampaşa Istanbul Turkey
info@spmedikal.com
Made in Turkey



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

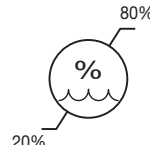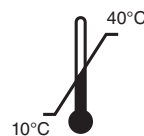

Instrucțiuni de utilizare**(Sigiliu recipient DFU 1-2026 versiunea D)**

Această instrucțiune de utilizare este valabilă pentru următoarele produse Sterinech™:

Sigiliu recipient:

902.111.1000 Sigiliu recipient 2,7cm albastru
902.112.1000 Sigiliu recipient 2,7cm albastru cu indicator de abur
902.113.1000 Sigiliu recipient 2,7cm roșu
902.114.1000 Sigiliu recipient 2,7cm roșu cu indicator de abur
902.115.1000 Sigiliu recipient 2,7cm galben
902.116.1000 Sigiliu recipient 2,7cm galben cu indicator de abur

**Avertismente:**

La primirea mărfurilor, vă rugăm să verificați coletul să nu prezinte deteriorări și să verificați data de expirare a materialelor.

Introducere:

Sigiliul recipientului este dezvoltat pentru a fi utilizat pe recipiente rigide pentru a asigura blocarea înainte de sterilizare. Indică faptul că recipientul nu a fost deschis între sterilizare și punctul de utilizare. Oferă un indicator de abur de tip 1 pentru a distinge dacă un recipient a fost supus sterilizării sau nu (dacă este prevăzut).

Indicatorul de abur de tip 1 nu oferă nicio concluzie cu privire la sterilizarea recipientului și nici la conținutul acestuia.

Caracteristici:

Sigiliul recipientului este produs dintr-un material PP special (fără DEHP) al cărui punct de înmuiere este de peste 150° Celsius. Sigiliile recipientului sunt disponibile cu sau fără indicator de abur.

Fiecare Sigiliu de recipient măsoară aprox. 30 x 50 mm (închis). Indicatorul chimic se schimbă din violet în verde atunci când este sterilizat cu un sterilizator cu abur: Parametru de ciclu: 134° Celsius timp de 3,5 minute sau 121° Celsius timp de 15 minute. Cernelurile utilizate sunt cerneluri non-toxice, fără metale grele.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa tehnică.

Dimensiunile știftului de etanșare a recipientului sunt de 27 mm.

Utilizare prevăzută:

Acest Sigiliu de recipient este recomandat pentru parametrii ciclurilor de sterilizare cu abur între 121 °C - 15 min și 134 °C - 3,5 min, dar poate fi folosit și pentru alte metode de sterilizare (cele fără indicator)

**Avertisment:**

Nu utilizați aceste carduri de recipient în cicluri de abur cu un SV diferit de cel afișat mai sus.

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu sigiliul de recipient trebuie raportat producătorului.

Instrucțiuni de utilizare:

Puneți sigiliul recipientului cu știftul prin încuietoarea recipientului rigid și închideți-l.

Puneți recipientul rigid în interiorul sterilizatorului și începeți ciclul.

După sterilizare, indicatorul de abur ar trebui să fi ajuns la culoarea finală (verde).

Condiții de depozitare:

Vă rugăm să țineți cont de condițiile de depozitare indicate pe eticheta cutiei produsului. Doar în cazul în care au fost îndeplinite condițiile de depozitare, SP Medikal garantează conformitatea produselor cu standardele în termenul de expirare.

Nu expuneți sigiliul de recipient la agenți de sterilizare sau la alte produse chimice de orice fel.

Conformitatea cu standardele:

Sigiliile de recipient sunt conforme cu standardele EN 868-8 și ISO 11140 - 1: 2014 (în cazul indicatorului de abur)

Fișă date tehnice:

Pentru aceste produse sunt disponibile fișe tehnice în care sunt anexate referințe la standarde, ambalaje, certificate etc.

Această instrucțiune de utilizare poate fi modificată în viitor.

Durată de depozitare:

Sigiliile de recipient nu au o perioadă de valabilitate limitată, dar trebuie depozitate în condițiile recomandate. Data de fabricație precum și numărul lotului sunt indicate pe eticheta ambalajului.

Simboluri:

	Data fabricației		A se păstra într-un loc răcoros și uscat
	Producător		A se păstra ferit de razele soarelui
	Cod produs		Limită de temperatură
	Număr de lot		Limită de umiditate
	Valabil până la data de		Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare
	Importat de		Citiți instrucțiunile de utilizare

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni