

Accessori 708 Delight



B18



B19



B12



B112



B58



B30



B52



B31



B40



B74



B79



B78



B23 - 24 - 25



B26 - 27



B45

- B18 fermatalloni
- B19 cinturino fermapiedi
- B12 tavolo in legno
- B112 bracciolo (dx o sx) per emiplegico
- B58 cintura di sicurezza
- B30 corrimano a timone
- B52 asta portaflebo
- B31 porta stampella
- B40 prolunga leva freno
- B74 dispositivo freno a tamburo per accompagnatore

- B79 tasca porta-documenti
- B78 ruotine antiribaltamento
- B23 cuscino spessore cm. 4
- B24 cuscino spessore cm. 6
- B25 cuscino spessore cm. 8
- B26 cuscino inclinato da 6-2 cm
- B27 cuscino inclinato da 8-4 cm
- B45 cuscino per schienale con attacchi

Informazioni tecniche 708 Delight

| larghezza totale | larghezza da piegata | larghezza sedile | altezza bracciolo | altezza sedile | altezza totale | lunghezza totale | profondità sedile | altezza schienale | peso |
|------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|------|
| 57 | 31 | 39 | 22 | 51 | 92 | 110 | 43 | 43 | 17,5 |
| 60 | 31 | 42 | 22 | 51 | 92 | 110 | 43 | 43 | 17,5 |
| 62 | 31 | 44 | 22 | 51 | 92 | 110 | 43 | 43 | 18,5 |
| 64 | 31 | 46 | 22 | 51 | 92 | 110 | 43 | 43 | 18,5 |
| 66 | 31 | 48 | 22 | 51 | 92 | 110 | 43 | 43 | 18,5 |
| 68 | 31 | 50 | 22 | 51 | 92 | 110 | 43 | 43 | 18,5 |

Misure in cm, peso in kg - Sono possibili delle differenze nelle dimensione e nel peso: ± 1,5 cm e ± 1,5 kg

La vostra garanzia di qualità

Per quanto riguarda la qualità, la carrozzina 708 Delight soddisfa le norme più esigenti imposte dagli Istituti di collaudo riconosciuti nella maggior parte dei Paesi Europei.

È la carrozzina ad adeguarsi a voi, non il contrario

La carrozzina è stata sviluppata sino ad essere un ausilio adattabile alle esigenze individuali, in cui si uniscono estetica e praticità. All' interno di tale evoluzione la Vermeiren ricopre un ruolo importante.

Il nostro principio di base è che la carrozzina si deve adattare a Voi e non il contrario, ecco perché le nostre carrozzine sono modulari. Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati e dotate di numerosi accessori intercambiabili tra di loro. Questo è il risultato delle nostre attività di ricerca e di 45 anni di esperienza.

Reatime s.r.l.

Via Torino 5
20039 Varedo (MI)
Italia

Tel.: (0039) 0362 55 49 50 • Fax: (0039) 0362 55 49 46
Visitate anche il nostro sito Internet: www.reatime.it



VERMEIREN
Mobilità illimitata

Per maggiori informazioni potete contattare il fornitore a voi più vicino.



E.R.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 3920 Kalmthout - Belgique - 05/2004

Modifiche tecniche riservate

708 delight

vermeiren

La Nuova Standard



Colori ed opzioni



708 D C32



708 D C29



708 D C16



708 D C27

La nuova standard

La carrozzina 708 Delight è dotata di braccioli estraibili e ribaltabili. Inoltre è dotata di forcelle con la possibilità di inserire diverse ruote anteriori, grazie al doppio foro di regolazione.

Caratteristiche

- Bracciolo estraibili (B02 o B03)
- Bracciolo regolabili in altezza ed estraibili (B05)
- Ruote anteriori 200 x 50 krypton soft
- Ruote posteriori 24 x 1 3/8 krypton soft
- Sedile e schienale imbottiti ed ignifughi

Opzioni ed alternative

- Versione da transito "T30"
- Versione ribassata "S"
- Versione con ruote posteriori estraibili
- Versione da emiplegico "HEM2"
- Pedane regolabili in estensione (B08 - BZ7)
- Sedili e schienali rigidi imbottiti (L14/L15 - L24/L25)

| Telaio | Rivestimento |
|--------|--------------|
| | |
| | |
| | |
| | |



708 D kit AMP

L'asse delle ruote grandi posteriori è arretrato rispetto al baricentro di qualche centimetro. Questa soluzione consente di bilanciare il peso della persona seduta evitando il ribaltamento.



708 D kit T30

708 D kit S

Questo modello di carrozzina è particolarmente adatto a persone di piccola statura. Inoltre viene spesso utilizzato da persone emiplegiche perché consente loro di spingersi con l'aiuto dei piedi.

708 delight

vermeiren

708 Delight Hem2



Ha tutte le caratteristiche del modello base. Il dispositivo di spinta che ha i due mancorrenti su una sola ruota permette che la carrozzina venga spinta con una mano sola da una persona emiplegica. Il sistema monoguida può essere facilmente montato a destra o a sinistra della carrozzina. Un sistema speciale di freno consente di bloccare le due ruote con una sola mano.



Braccioli



B02



B03



B05

Pedane ed appoggiapiedi



B06



BA6



BK6



BK7/BL7



B07/B08



BZ7/BZ8



BZ10

Sedili e schienali




L14



L15



L24

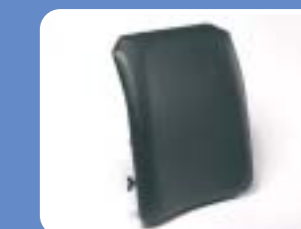

L25



Sedile soft



Schienale soft



B73



B17



L02



L55



B22



systems a modular e