

# NEW

SINCE 1966  
MADE IN ITALY

# Aspira

by **FLAEM**®

## Aspiratore chirurgico professionale *Professional surgical aspirator*



**Apparecchio per uso medico e chirurgico utilizzabile nelle strutture di assistenza sanitaria quali gli ospedali, nella terapia domiciliare e per aspirazione faringea**  
*Suction unit for medical and surgical use. Suitable for use in health care facilities such as hospitals, for home care and for pharyngeal suctioning.*

**Flusso reale, testato e validato: 13,5 l/min'**  
*Real flow, tested and validated: 13.5 l/min'*


[www.flaem.it](http://www.flaem.it)



Borsa da trasporto  
(opzionale)  
*Carrying bag (optional)*

**COMANDO MANUALE DEL FLUSSO ASPIRANTE** : l'aspiratore ASPIRA è dotato del sistema brevettato Flaem ASPICOMFORT (vedi schema in fig.) che permette una regolazione fine del potere aspirante dell'apparecchio; in altre parole il medico può regolare con alta precisione l'effetto dell'aspirazione sul paziente, ottenendo così un'applicazione nel massimo confort del paziente stesso.


**SUCTION FLOW CONTROL**: Flaem's continuous innovation has released a patented suction control system, ASPICOMFORT, allowing a fine control of the suction level. This enables the doctor to regulate the suction effect on a patient with a high degree of precision in order to ensure the best possible comfort to the patient during treatment.

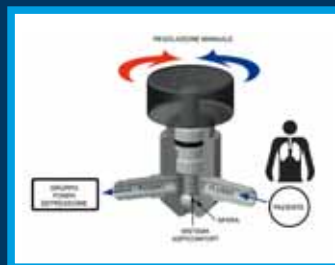

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Designazione <i>Designation</i>	Alto vuoto / basso flusso <i>High vacuum / low flow</i>
Uso <i>Use</i>	Continuo <i>Continuous</i>
Alimentazione <i>Operating voltage</i>	230 V - 50 Hz
Livello depressione regolabile <i>Adjustable vacuum range</i>	da -0,16 a -0,83 bar approx. <i>from -0.16 to -0.83 bar approx.</i>
Portata aria <i>Air flow</i>	13.5 l/min approx.
Rumorosità (a 1 m) <i>Sound level (at 1 m)</i>	56 dB (A) approx.
Dimensioni <i>Dimensions</i>	32,5 (L) x 12 (P) x 23.5 (H) cm <i>12.8 (length) x 4.72 (width) x 9.25 (height) in</i>
Peso <i>Weight</i>	2,4 Kg <i>2.4 Kg - 5.3 lb</i>
Garanzia <i>Warranty</i>	2 ANNI <i>Please refer to your local dealer</i>

## OMOLOGAZIONI APPROVALS

Norma di riferimento <i>In compliance with std.</i>	EN 10079-1: 2009 aspiratori azionati elettricamente <i>electrically powered suction equipment</i>
Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC (solo per unità 230 V ~ 50 Hz) <i>In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)</i>	CE 0051
Codice <i>Code</i>	AS01P00
Imballo <i>Master carton</i>	n° 1 pz. <i>1 piece</i>
	

## ACCESSORI IN DOTAZIONE (RICAMBIABILI) ACCESSORIES (SPARE PARTS)

Vaso di raccolta secreti, sterilizzabile, da 1000 ml <i>Sterilizable 1000 ml collection jar</i>
Tubi di collegamento in silicone sterilizzabili <i>Sterilizable silicon connection tubes</i>
Filtro anticontaminazione microbica, idrofobico <i>Antibacterial and hydrophobic filter</i>
Cannula sterile monouso CH18 <i>Disposable sterile suction catheter</i>
Comando manuale del flusso aspirato monouso <i>Disposable manual suction regulator</i>

## ACCESSORI OPZIONALI OPTIONAL ACCESSORIES

Borsa da trasporto <i>Carrying Bag</i>
Portavaso aggiuntivo <i>Additional jar holder</i>



**Aspira**  
by **FLAEM**

### Patented Product and PCT International Patent Pending

15419-0 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2012 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.



Fabbricante/Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A.  
Via Colli Storici, 221  
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy  
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287  
info@flaemnuova.it

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda  
con sistema di qualità certificato  
Company with certified quality system



Export Department of FLAEM NUOVA

medexpo  
international s.r.l.

3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy  
Phone (39) 02 4120769  
Fax (39) 02 48376295  
E-mail: info@medexpointernational.com

[www.fluem.it](http://www.fluem.it)

Numero Verde  
**800 236622**  
SERVIZIO CLIENTI FLAEM