



SINCE 1966
MADE IN ITALY

Aspira^{Plus}

by **FLAEM**[®]




Aspiratore chirurgico professionale *Professional surgical aspirator*

**Apparecchio per uso medico
e chirurgico utilizzabile nelle strutture
di assistenza sanitaria quali gli ospedali,
nella terapia domiciliare e per aspirazione faringea**
*Suction unit for medical and surgical use. Suitable for use in health
care facilities such as hospitals, for home care and for pharyngeal suctioning.*

Flusso validato TÜV: 20 l/min'
Flow validated by TÜV: 20 l/min'

www.flaem.it

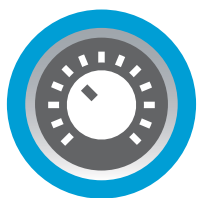

Regolazione del livello
di depressione
Suction level regulation

L'aspiratore ASPIRA è dotato del sistema brevettato Flaem ASPICONFORT che permette una regolazione fine del potere aspirante dell'apparecchio; in altre parole il medico può regolare con alta precisione l'effetto dell'aspirazione sul paziente, ottenendo così un'applicazione nel massimo confort del paziente stesso.

Flaem's continuous innovation has released a patented suction control system, ASPICONFORT, allowing a fine control of the suction level. This enables the doctor to regulate the suction effect on a patient with a high degree of precision in order to ensure the best possible comfort to the patient during treatment.



Borsa da trasporto
(opzionale)
Carrying bag (optional)

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Mod. P1211EM

Designazione <i>Designation</i>	Alto vuoto / Alto flusso <i>High vacuum / High flow</i>
Uso <i>Use</i>	Continuo <i>Continuous</i>
Alimentazione <i>Operating voltage</i>	230 V - 50 Hz
Livello depressione regolabile <i>Adjustable vacuum range</i>	da -0,05 a -0,83 bar approx. <i>from -0.05 to -0.83 bar approx.</i>
Portata aria <i>Air flow</i>	20 l/min approx.
Rumorosità (a 1 m) <i>Sound level (at 1 m)</i>	56 dB (A) approx.
Dimensioni <i>Dimensions</i>	32,5 (L) x 12 (P) x 23.5 (H) cm <i>12.8 (length) x 4.72 (width) x 9.25 (height) in</i>
Peso <i>Weight</i>	2,4 Kg <i>2.4 Kg - 5.3 lb</i>
Garanzia <i>Warranty</i>	3 ANNI <i>Please refer to your local dealer</i>

OMOLOGAZIONI
APPROVALS

(solo per unità 230 V ~ 50 Hz)
(for the 230 V ~ 50 Hz unit only)

Norma di riferimento: ISO 10079-1 aspiratori azionati elettricamente. <i>In compliance with: ISO 10079-1 electrically powered suction equipment</i>	 • BAUART GEPRÜFT • TYPE APPROVED
Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC <i>In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive</i>	 0051
Codice <i>Code</i>	AS20P00
Imballo <i>Master carton</i>	n° 2 pz. <i>2 piece</i>
 8 018294 011895	

ACCESSORI IN DOTAZIONE (RICAMBIABILI)
ACCESSORIES (SPARE PARTS)

Vaso di raccolta secreti, sterilizzabile, da 1000 ml <i>Sterilizable 1000 ml collection jar</i>
Tubi di collegamento in silicone sterilizzabili <i>Sterilizable silicon connection tubes</i>
Filtro antibatterico/antivirale, idrofobico <i>Antibacterial/antiviral and hydrophobic filter</i>
Cannula sterile monouso CH18 <i>Disposable sterile suction catheter CH18</i>
Comando manuale del flusso aspirato monouso <i>Disposable manual suction regulator</i>

ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES

Borsa da trasporto <i>Carrying Bag</i>
Portavasoggiuntivo <i>Additional jar holder</i>



Filtro silenziatore
Silencer filter

Patented Product and PCT International Patent Pending

15988-0 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2013 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.



Fabbricante/Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system



CERTIFICATO N. 9120-FLAE
CERTIFICATO N. 9124-FL02

Export Department of FLAEM NUOVA



medexpo international s.r.l.

3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy
Phone (39) 02 4120769
Fax (39) 02 48376295
E-mail: info@medexpointernational.com

www.flam.it

Numero Verde
800 236622
SERVIZIO CLIENTI FLAEM