

Visiotest™

Due strumenti per un servizio unico.
Potete credere ai vostri occhi.

VISIOTEST™ e CAMPITEST™ gli apparecchi pensati per voi che volete fornire un servizio professionale e completo ai vostri pazienti.

Con VISIOTEST™ e CAMPITEST™ avrete a disposizione la professionalità e la praticità di uno strumento per la misurazione delle funzioni visive in pochi minuti.

E' uno strumento concepito per esplorare rapidamente i principali parametri della funzione visiva, in visione da lontano e da vicino. Design moderno, compatto, leggero e trasportabile VISIOTEST™ è uno strumento indispensabile nell'attività quotidiana di depistage. I test e gli ottotipi rigorosamente selezionati assicurano una buona correlazione con i metodi d'esame praticati dai professionisti. L'apparecchio è fornito con tavola di controllo per l'operatore, per guidare i vari test, e su schede di rilevamento sono registrabili le risposte del paziente relative a:

TEST IN VISIONE DA LONTANO:

Controlli Monoculari O. D. e O. S.

- Misurazione dell'acuità
- Rilevamento dell'Astigmatismo
- Rilevamento dell'Ipermetropia con lenti addizionali

Controlli Binoculari.

- Misurazione dell'acuità e visione stereoscopica
- Tendenza Ametropica con test Bicromatico
- Rilevamento Forie in verticale ed orizzontale
- Percezione dei colori con tavole di ISHIHARA

TEST IN VISIONE DA VICINO:

Controlli Monoculari O. D. e O. S.

- Misurazione dell'acuità
- Rilevamento dell'Astigmatismo
- Rilevamento dell'Ipermetropia con lenti addizionali

Controlli Binoculari.

- Misurazione dell'acuità e visione stereoscopica
- Tendenza Ametropica con test Bicromatico
- Rilevamento Forie in verticale ed orizzontale

Mediamente l'esecuzione dei test per lontano e per vicino richiede circa dieci minuti a persona.

Tramite il manuale, fornito con lo strumento, sono disponibili utili elementi interpretativi e diagnostici per analizzare le schede pazienti.



BORSA DA TRASPORTO PER VISIOTEST™:

Per un comodo, sicuro, pratico spostamento dello strumento e dei suoi accessori.



VISIONE DA LONTANO, INTERMEDIA E DA VICINO

- MISURAZIONE DELL'ACUITA'
- RILEVAMENTO DELL'IPERMETROPIA
 - ASTIGMATISMO
 - STEREOSCOPIA
 - BICROMATICO
 - FORIE
 - COLORI

VDT

Campitest™




CAMPITEST™ (dispositivo di perimetria) è un accessorio applicato a VISIOTEST™ per testare il campo visivo orizzontale.

L'impiego di diodi lampeggianti, il cui colore corrisponde al massimo della sensibilità dell'occhio, permette di effettuare un esame in condizioni ottimali di qualità, precisione e affidabilità.

CAMPITEST™, accessorio telecomandato, mantiene inalterata la compattezza di VISIOTEST™.

L'installazione di CAMPITEST™ è rapida e sicura.

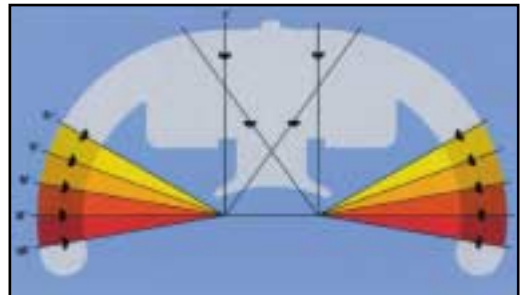

Schema riportante gli angoli di presentazione dei diodi in rapporto all'asse visivo.

Kit 50

(per controllo VISIONE INTERMEDIA):

Stessi test del lontano e vicino, ma indispensabili per attività al Computer, Videoterminale, e mansioni con protocolli specifici.



Visiotest™ - Campitest™

Caratteristiche Tecniche VISIOTEST™

- Illuminazione del campo luminoso dei test di acuità: 320 cd/m²
- Contrasto degli ottotipi vicino a 1
- Apparecchio regolabile in altezza
- Peso: 4,9 kg
- Dimensioni: P.30 x L.24,5 x H.37 cm
- Tensione di alimentazione: 115/230V - 50/60 Hz (bitensione)
- Consumo elettrico: 10W
- Conformità alle norme: CEI 601-1 VDE 0871

Caratteristiche Tecniche CAMPITEST™

- Collegamento a VISIOTEST™
- Campo visivo dell'occhio destro e dell'occhio sinistro: 60°, 70°, 80°, 90°, 100° e campo visivo nasale.
- Peso: 0,5 kg
- Dimensioni: ø 300 mm
- Telecomando: 13,5 x 4,5 x 3,5 cm con cavo di 1,6 m

VDT



*In visione da lontano,
intermedia e da vicino.*



GARANZIA

A decorrere dalla consegna dello strumento si applica, come previsto e regolamentato per legge, e gestita con specifico certificato, la garanzia di 24 mesi, presso il Centro di Assistenza sede Essilor Italia di Milano.

- garanzia per vizi art. 1490 c.c.
- garanzia di buon funzionamento art. 1512 c.c.

ASSISTENZA TECNICA

Con riferimento all'assistenza tecnica per strumentazione di Depistage Visivo, presso la sede Essilor Italia di Milano, è operativo un Centro Assistenza con tecnici Essilor.

In caso di particolari esigenze sono stipulabili, dalla scadenza della garanzia suindicata, contratti personalizzati di "Manutenzione Programmata".



ESSILOR ITALIA Spa
Via Noto, 20141 MILANO
Servizio Medicina del lavoro
Tel. 02/535.791 - Fax. 02/535.79.272
www.visiotest.it - info@visiotest.it

Assistenza Tecnica
Fax. 02/535.79.260