


FLAEM[®]



IL BENESSERE È DI CASA

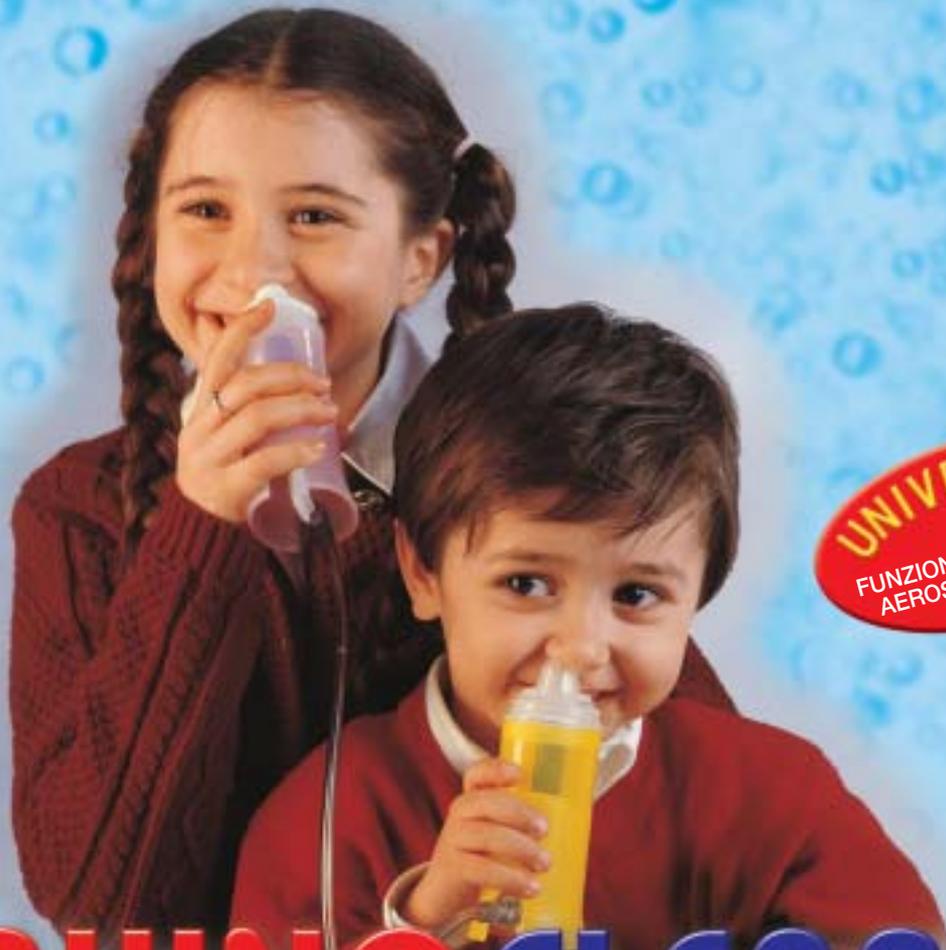

UNIVERSALE
FUNZIONA CON QUALSIASI
AEROSOL PNEUMATICO

RHINO CLEAR[®] **DOCCIA NASALE**

*Il mezzo veloce ed efficace
per il lavaggio e il trattamento con farmaci
delle cavità nasali e del rinofaringe*

Il piacere di respirare bene

Perchè utilizzare la doccia nasale Rhino Clear® ?

Cominciamo dall'anatomia del naso
Sono molteplici le funzioni dell'apparato respiratorio superiore:

- **FILTRAGGIO**
- **RISCALDAMENTO**
- **UMIDIFICAZIONE**

FILTRAGGIO


Il filtraggio è agevolato dalla particolare forma delle vie nasali.
Tale forma induce ad una brusca deviazione del flusso d'aria ricco di particelle di polvere, che vengono eliminate entrando in contatto con le mucose dei turbinati (o cornetti nasali)

RISCALDAMENTO


La mucosa nasale è fortemente vascolarizzata e quindi rilascia calore

UMIDIFICAZIONE

L'umidificazione dell'aria viene garantita dalle cellule calciformi e dalle grosse ghiandole che secernono un muco denso e ricco di umidità

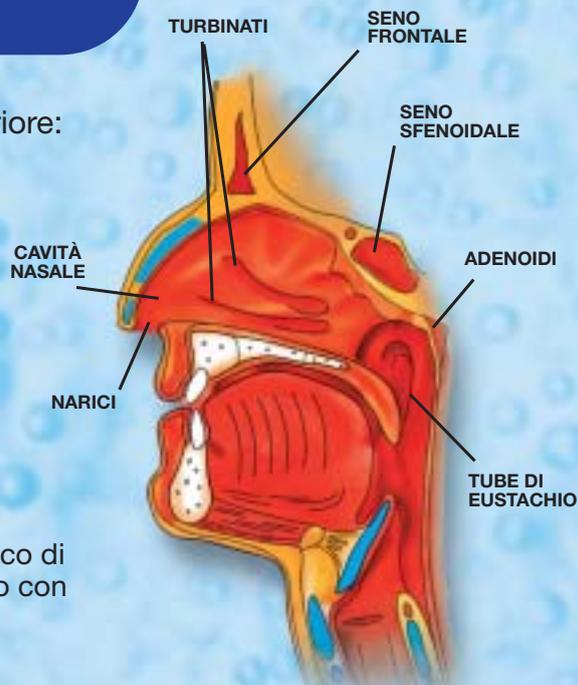

I seni paranasali

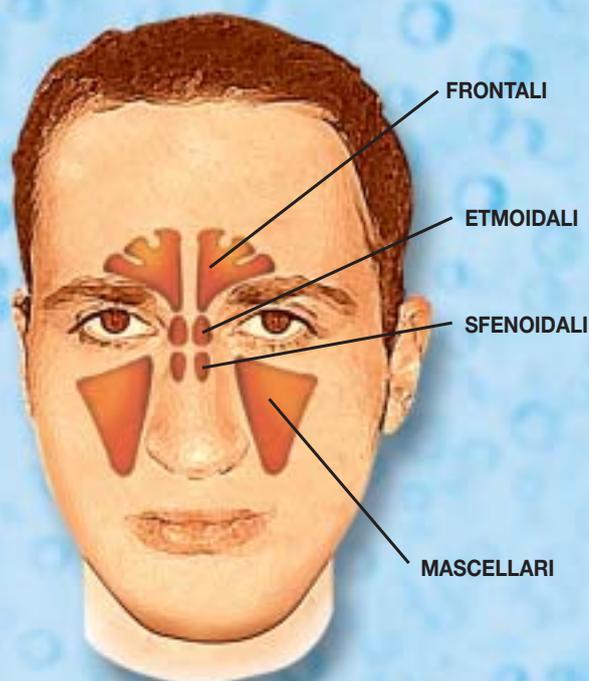

E' possibile che le secrezioni ristagnino nei seni paranasali (frontali, etmoidali, sfenoidali e mascellari). Un'alterazione di queste importanti e delicate funzioni (filtraggio, riscaldamento e umidificazione) sono all'origine delle più comuni infiammazioni, che riguardano il naso e gli organi ad esso connessi come riniti, sinusiti, otiti, adenoidismo e allergie stagionali, etc.

La cosa più semplice e veloce da fare in questi casi è lavare il naso per restituirgli efficienza e ripristinare la normale respirazione al nostro corpo.

Rhino Clear® è il mezzo rapido ed efficace per effettuare il lavaggio con soluzione fisiologica e il trattamento con farmaci delle cavità nasali e del rinofaringe, sempre previa consultazione del medico.

Rhino Clear® è un nebulizzatore nasale che produce un getto di nebbia, composto da particelle di dimensione idonea al trattamento specifico delle cavità nasali e delle alte vie respiratorie. Il getto di nebbia introdotto all'interno delle narici, idrata le mucose, fluidifica e rimuove adeguatamente le secrezioni nasali, raccogliendole in un'apposita camera.

RHINOCLEAR®

L'igiene innanzitutto. Vi consigliamo una doccia nasale per ogni componente della famiglia



- **UNIVERSALE**

Rhino Clear® è abbinabile a tutta la gamma di compressori pneumatici Flaem Nuova ed a qualsiasi altro compressore pneumatico per aerosolterapia presente sul mercato. Nel caso di utilizzo con compressori pneumatici per aerosolterapia di altro fabbricante è importante attenersi alle istruzioni d'uso di quest'ultimo. Flaem Nuova declina ogni responsabilità per un non corretto utilizzo di compressori per aerosolterapia di altri produttori in abbinamento a Rhino Clear®.

- **VELOCE**

Nebulizza 10 ml di soluzione in circa 2 minuti

- **EFFICACE**

Rimuove le secrezioni, le polveri e le sostanze nocive presenti all'interno dei seni paranasali raccogliendole in un apposita camera

- **PRATICA**

Dotata di pulsante per gestire la nebulizzazione

- **ADATTA A TUTTE LE ETA'**

Ogni Rhino Clear® è munita di 3 adattatori nasali

- **FACILITA' D'USO**

Nebulizza soluzioni saline (isotoniche, ipertoniche, ai liposomi, etc.), acque termali o farmaci normalmente reperibili in farmacia

- **ERGONOMICA**

La forma del corpo doccia ne facilita l'adattabilità e l'utilizzo

- **ATOSSICA**

Costruita con materiali biocompatibili ed anallergici

Adattatori nasali




Fino a 3 anni

Da 3 a 12 anni

Da 12 anni in su

I componenti di Rhino Clear®

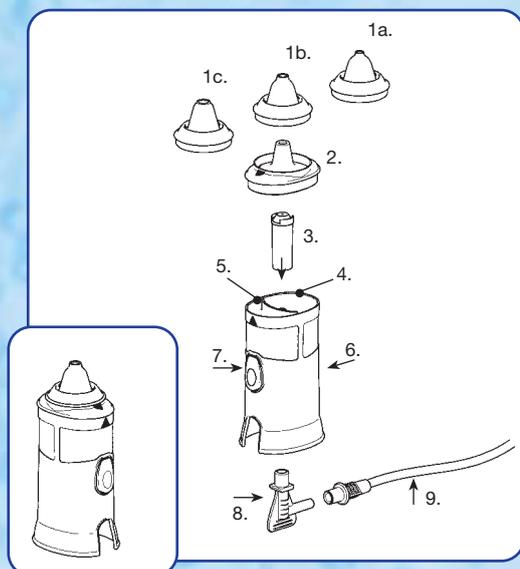

1a) Adattatore nasale "TRASPARENTE"

1b) Adattatore nasale "BIANCO"

1c) Adattatore nasale "AZZURRO"

2) Separatore

3) Ugello

4) Camera nebulizzatrice da 10 ml max

5) Camera di raccolta

6) Corpo doccia ergonomico

7) Pulsante di erogazione

8) Raccordo collegamento tubo-doccia nasale

9) Tubo di collegamento al compressore

Il piacere di respirare bene

Rhino Clear® oltre ad essere disponibile singolarmente, viene proposto nei kit **BABYNEB SYSTEM** e **NEBULFLAEM SYSTEM** opportunamente studiati per il trattamento dell'intero apparato respiratorio.

BABYNEB SYSTEM

Aerosol pediatrico + Ampolla + Doccia Nasale

GARANZIA
3 ANNI



NEBULFLAEM SYSTEM

Aerosol professionale + Ampolla + Doccia Nasale

GARANZIA
6 ANNI



STUDI E RICERCHE

La costante collaborazione con laboratori altamente specializzati ed importanti centri universitari nazionali ed internazionali, ci consente di realizzare apparecchi e sistemi di nebulizzazione scientificamente e clinicamente testati, a garanzia per l'utente finale dell'assoluta sicurezza costruttiva dell'apparato in uso. I risultati di questi test e studi scientifici sono custoditi presso i nostri archivi e sono a disposizione per eventuali consultazioni da parte di categorie professionali specializzate, dopo opportuna nostra autorizzazione.

PATENT PENDING **RHINO CLEAR®**



ESPOSITORE RHINO CLEAR® da 8 pezzi colori assortiti

Codice	ACO204P	 8 018294 005603
Imballo	n° 4 Pz	

Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate.

Fabbricante / Manufacturer:
FLAEM NUOVA S.p.A
 Elettromedicali/Elettrodomestici
 Via Colli Storici, 221-223-225
 25010 S. Martino della Battaglia
 Brescia (ITALY)
 Phone (39) 030 9910168
 Fax (39) 030 9910287
 E-mail: info@flaemnuova.it
 www.flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda certificata UNI EN ISO 9001.

L'obiettivo di FLAEM NUOVA è la piena soddisfazione dei propri clienti offrendo loro prodotti all'avanguardia per un costante miglioramento di qualità della vita.