


Informazioni tecniche letto Illico

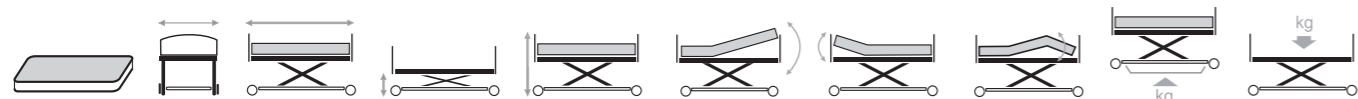

900x2000x120 max. 20 kg 1024 2080 298-828 783-1313 36,8° 70° -17,2° 83,5* 170

*peso escl. sponde laterali, asta di sollevamento e triangolo. Misure in mm, peso in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (1,5mm e 1,5kg).

Illico
Letto elettrico

Pannelli di diverso colore e due tipologie di sponde laterali



Per abbinare il letto al colore degli interni di casa, **Illico** può essere equipaggiato di pannelli in colore scuro o color faggio.



Le sponde in metallo sono facili da montare e da abbassare con un solo movimento. Le sponde in legno hanno una parte in plastica di copertura alla fine.



La base del letto è disponibile in **ABS** per una facile disinfezione.



Garanzia di qualità

Per quanto riguarda la qualità, il letto Illico soddisfa le norme più esigenti imposte dagli Istituti di collaudo riconosciuti nella maggior parte dei Paesi Europei.

Vermeiren Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Italia

Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17

www.vermeiren.it - info@vermeiren.it

Per maggiori informazioni potete contattare il fornitore a voi più vicino.



R.E.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgio - 10/2018



Immagini solo a scopo illustrativo. Alcune funzionalità potrebbero essere opzionali.



VERMEIREN
Mobilità illimitata

Modifiche tecniche riservate.




Mobilità illimitata

Illico



Semplice telecomando con funzioni di blocco

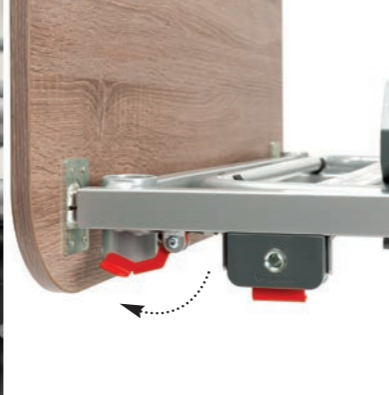

Facile rimozione dei pannelli e delle sponde laterali



Solide ruote con freno



Viti in plastica a forma di stella per un facile montaggio del telaio



Un kit di trasporto su ruote per un facile spostamento del letto



Facile smontaggio del telaio senza utensil

Pratico e confortevole

- Regolazione elettrica in altezza della base da mm. 298 a mm 828
- Regolazione elettrica della parte testa
- Regolazione elettrica della parte piedi
- Regolazioni tramite telecomando con funzione di blocco
- Dimensioni del materasso 900 mm x 2000 mm
- Carico massimo 170 kg (paziente e materasso)
- Due tipologie di sponde laterali
- Asta sollevammatati posizionabile a destra o sinistra
- 4 ruote frenanti singolarmente
- Diverse tipologie di pannelli anteriori e posteriori
- Facile da assemblare e da smontare
- Kit di trasporto su ruote



Asta sollevammatati può essere posizionato a destra o sinistra del letto. La cinghia può essere regolata alla corretta lunghezza



4 posizionatori, 2 nella parte della testa e 2 nella parte dei piedi, mantengono il materasso in posizione

Una singola pressione sul pulsante laterale per rilasciare le sponde laterali



Il telecomando è dotato di un filo a spirale lungo per poterlo posizionare ovunque sul letto.

L'ultima parte del supporto piedi può essere regolata manualmente in diverse posizioni

Assemblaggio ultra SEMPLICE senza strumenti

Non dovete più cercare un cacciavite o la chiave a brugola con il nostro letto **Illico**. Basta una sola persona per assemblare o smontare il letto in pochi minuti. Rimuovere le sponde laterali, togliere i pannelli in legno, smontare il telaio del letto e sei pronto.

