

# CO03.30.2

Compressore BP2 con regolatore di pressione a 2 uscite  
BP2 two way compressor with pressure regulator



**Compressore ad aria alternata con regolatore di pressione. Utilizzato per tutti quei soggetti con particolari problematiche di peso e sensibilità cutanea; il range di peso dell'utilizzatore può variare tra i 40 e i 150 kg.** Il compressore è previsto anche nella versione con spia di allarme per la segnalazione di eventuali guasti al materasso o al compressore. Il compressore CO 03 può essere usato con il materasso tradizionale a bolle o il materasso a elementi intercambiabili.

#### Caratteristiche tecniche

- 20 V - 50 Hz - Fus 1 A
- Durata ciclo 3' Portata ~3,3 litri al ciclo
- Campo di pressione 80/160 mmHg


**Alternating air compressor with pressure regulator. Used for all individuals with weight problems and sensitive skin; the user weight range can vary from 40 to 150 kg.** The compressor is also available in a version with a warning light which indicates any faults involving the mattress or compressor. Both models can be used with a traditional air mattresses or mattresses with interchangeable parts.

#### Technical specifications

- 20 V - 50 Hz - Fus 1 A
- Cycle duration 3' Capacity ~3,3 litres per cycle
- Pressure field 80/160 mmHg

# MA.00.e

Materasso antidecubito ad aria a pressione alternata a due uscite  
BP2 two way anti-bedsore air mattress with alternating air pressure

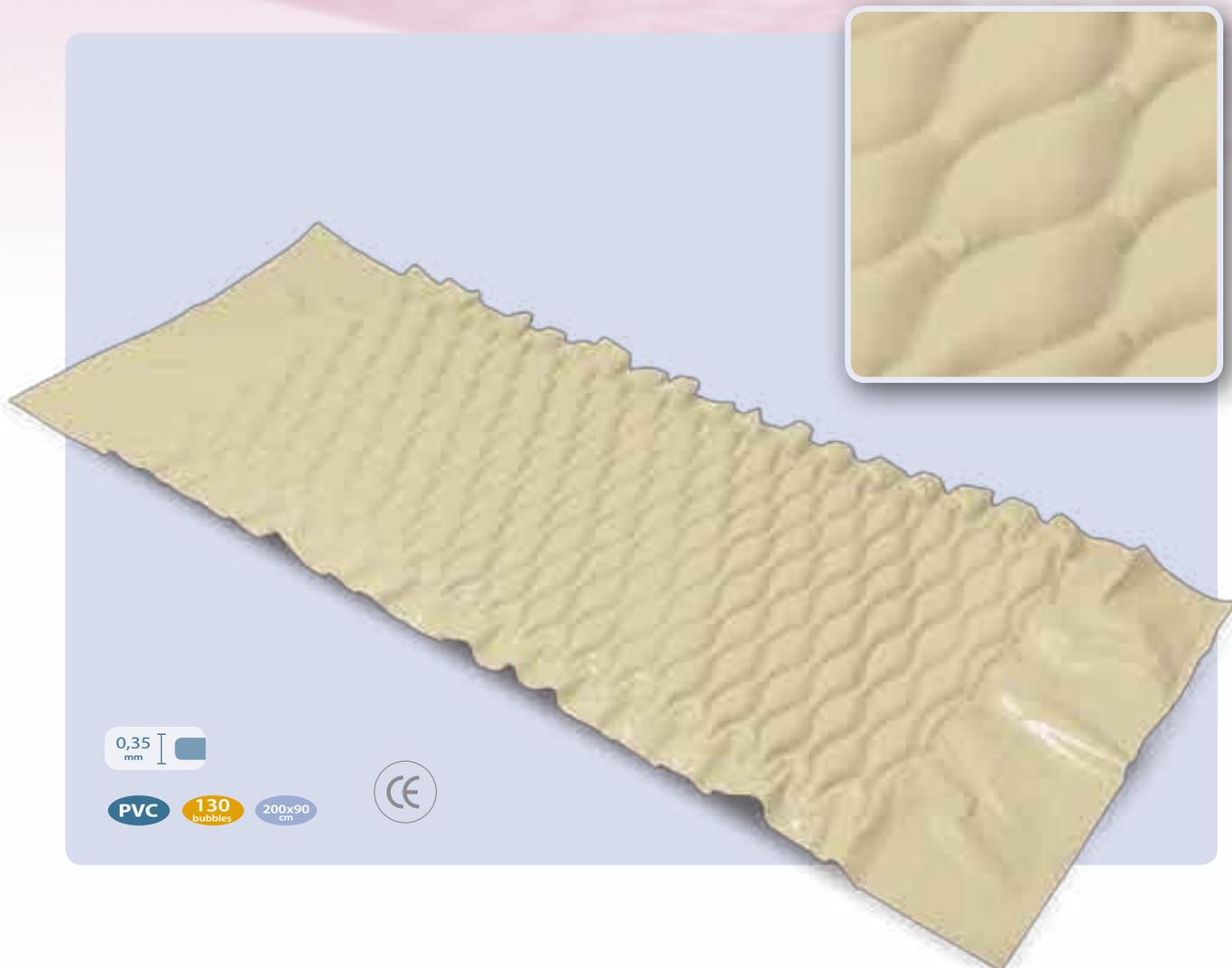

Il materasso a bolle d'aria "Bubble Pad" è composto da una serie di 130 bolle d'aria che si gonfiano e si sgonfiano alternativamente in senso latitudinale mediante l'apposito compressore. Questa caratteristica permette di poter essere usato anche su letti articolati. È realizzato con PVC atossico, antimacchia e resistente agli agenti atmosferici.

The air bubble mattress "Bubble Pad" is made up of a series of 130 air bubbles that alternately inflate and deflate in a latitudinal direction through the compressor.

This process allows the mattress to also be used on articulated beds. The mattress is made on atoxic PVC, is also non-stain and resistant to the atmospheric agents.

## Caratteristiche tecniche

- **Materiale** PVC (EN-71, atossico)
- **Resistente al freddo** -25 gradi
- **Spessore** 0,30 mm
- **Dimensioni** 200x90 cm
- **Altezza celle SGONFIO:** 2 1/2"
- **Numero di celle SGONFIO:** 130

## Technical specifications

- **Material** PVC PVC (EN-71, atoxic)
- **Cold resistant** -25 degree
- **Thickness:** 0,30 mm
- **Dimensions:** 200x90 cm
- **Height lo cells DEFLATE:** 2 1/2"
- **Number of cells DEFLATE:** 130