

SENSE

Misuratore di pressione automatico con rilevatore di stress-psico-fisico

INDICATORE DEL VALORE A RIPOSO



Rileva se durante la misurazione si è in uno stato psico-fisico ottimale



NEW



Controllo posizionamento bracciale



Bracciale universale 22-42 cm



Indicatore battiti cardiaci irregolari



Classificazione dei valori misurati



5 Anni di Garanzia

Medel **SENSE** è il nuovo misuratore di pressione è in grado di rilevare se durante la misurazione si è in uno stato psico-fisico ottimale, dandone indicazione tramite simbolo sul display. Dotato della funzione media, rileva in modo semplice ed automatico la media delle misurazioni diurne, notturne e totali. Medel SENSE permette la memorizzazione dei valori misurati per 4 diversi utenti con 30 posizioni di memoria per ciascuno. Un'indicazione sul display permette inoltre di verificare il corretto posizionamento del bracciale per una misurazione accurata. Garanzia 5 anni. Dispositivo medico di Classe IIa.

- Display chiaro e ben leggibile • Indicatore di rischio: Classificazione dei risultati di misurazione con scala colorata • Indicatore del valore a riposo per misurazioni precise
- Indicatore di corretto posizionamento del bracciale • 2 orari di sveglia impostabili • Segnalazione di eventuali disturbi del ritmo cardiaco • Bracciale universale 22 - 42 cm • Quattro memorie utente per 30 valori di misurazione ciascuna • Calcolo della media • Inclusive batterie e custodia.



Misurazione attendibile in condizione di riposo ottimale

INDICATORE DEL VALORE A RIPOSO



Misurazione in condizioni di riposo non ottimale. Si consiglia di ripetere la misurazione dopo una pausa di almeno 5 minuti.




Calcolo media delle misurazioni



4 utenti con 30 posizioni di memorie ciascuno



2 orari di sveglia impostabili

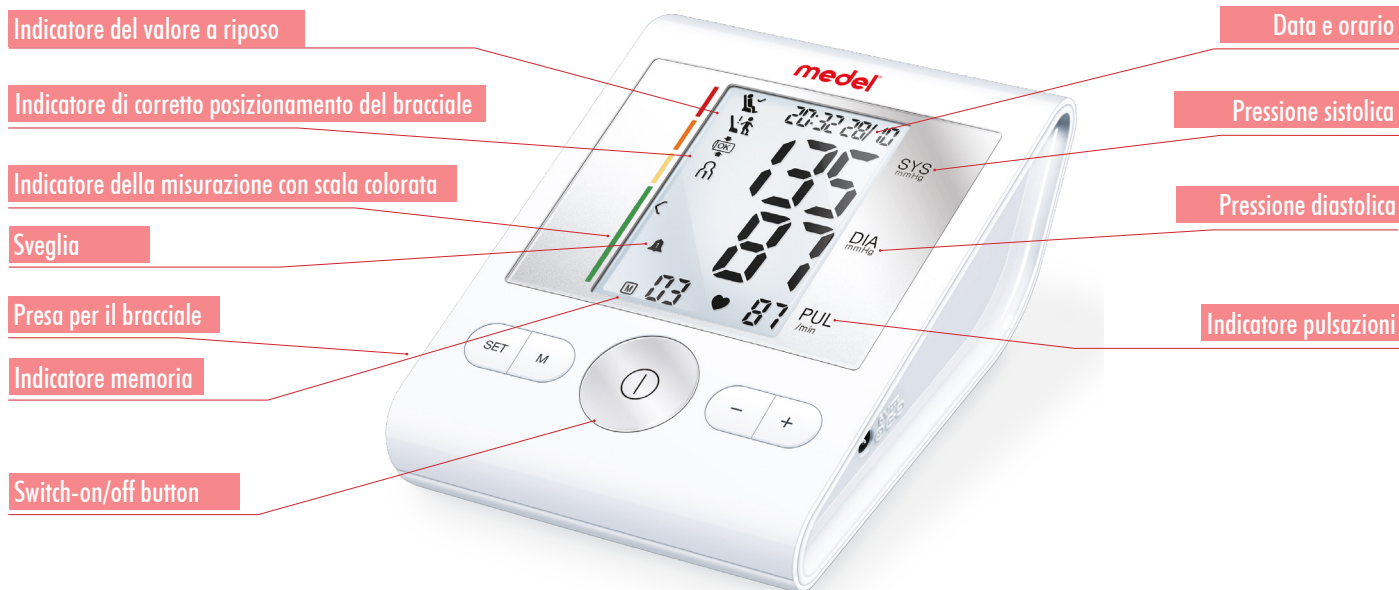

SPECIFICHE TECNICHE

Metodo misurazione	Oscillometrico
Precisione misura	Pressione +/- 3 mmHg battiti +/- 5%
Range di misurazione	Pressione da 0 a 300 mmHg; pulsazioni 40-199 battiti/min
Alimentazione batterie	4 alcaline AA 1,5V
Memoria misurazioni	4 x 30 posizioni di memoria
Numero utenti	4
Tripla visualizzazione (Sist/Diast/Puls)	✓
Indicatore data/ora	✓
Indicatore battito cardiaco irregolare (Aritmia-IHB)	✓
Media delle misurazioni	✓
Dimensioni	L 134 mm x W 103 mm x H 60 mm
Tipo bracciale	Morbido, non preformato
Bracciale STD in dotazione	Universale 22-42 cm



ACCESSORI

- Bracciale universale circonferenza 22-42 cm
- Pratica custodia

DISPONIBILE ANCHE CON ALIMENTATORE
PER L'UTILIZZO SENZA BATTERIE



95251

