

5 Anni di Garanzia
Years warranty

DAL 1966
ITALIAN DESIGN

Olly Vaporizer

by **FLAEM**®

Umidificatore a vapore caldo Warm Steam Vaporizer

- Sicuro, omologato da: INTERTEK GS
- Flusso vapore regolabile
- Luce notturna
- Adatto anche per la diffusione di oli essenziali
- Capacità serbatoio 4,5 L
- Spegnimento automatico
- Safe, approved by INTERTEK GS
- Adjustable steam flow
- Night-light
- Suitable for vaporizing essential oils
- 4,5 liter capacity
- Automatic shut off when it runs out of water



Esce vapore sterile pre-raffreddato
Delivering pure pre-cooled steam



Facile da pulire
Easy to clean



14 Ore di autonomia
Hours operation



DAL 1966
ITALIAN DESIGN

Olly Vaporizer
by FLAEM®

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Alimentazione/Potenza
Power supply/Power 220-240 Vac / 50Hz; 240-260W

Capacità serbatoio
Reservoir capacity 4,5 litri approx.
Approx. 4.5 litres

Autonomia
Operation time 14 ore / hours

Dimensioni L x P x H (cm)
Dimensions L x W x H (cm) 27 x 29 x 22

Peso (a secco)
Weight (empty) 1.3 Kg

Codice
Code HE21E00

Modello
Model P0413ED

Imballo
Master carton n° 2 pz.
2 pieces

OMOLOGAZIONI APPROVALS

CE Marking: in conformity with EU Directive 2006/95 EEC

Approval Mark: Intertek GS


Safety Electrical Standards: Europe:
EN 60335-2-98:2003 + A1:2005 + A2:2008
and EN 60335-1:2012.

Australia/New Zealand:
AS/NZS 60335.2.98:2005 + A1:2009;
AS/NZS 60335.1:2011 + A1:2012.

EMC Standards: EN 55014-1:2006 + A1:2009;
EN 55014-1:1997 + A1:2001 + A2:2008;
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009;
EN 61000-3-3:2013



1. Ampio contenitore portaessenze
Large cup for essential oils
2. Pratico indicatore di livello MAX
MAX water level mark
3. Capacità 4,5 litri
Capacity: 4.5 liters
4. Regolazione flusso vapore
Adjustable steam flow
5. Elemento riscaldante con rivestimento antiaderente per facilitare la pulizia
Heating element with non-stick coating for easy cleaning
6. Innovativo sistema raffredda vapore
Innovative steam cooling system
7. Luce notturna
Night-light

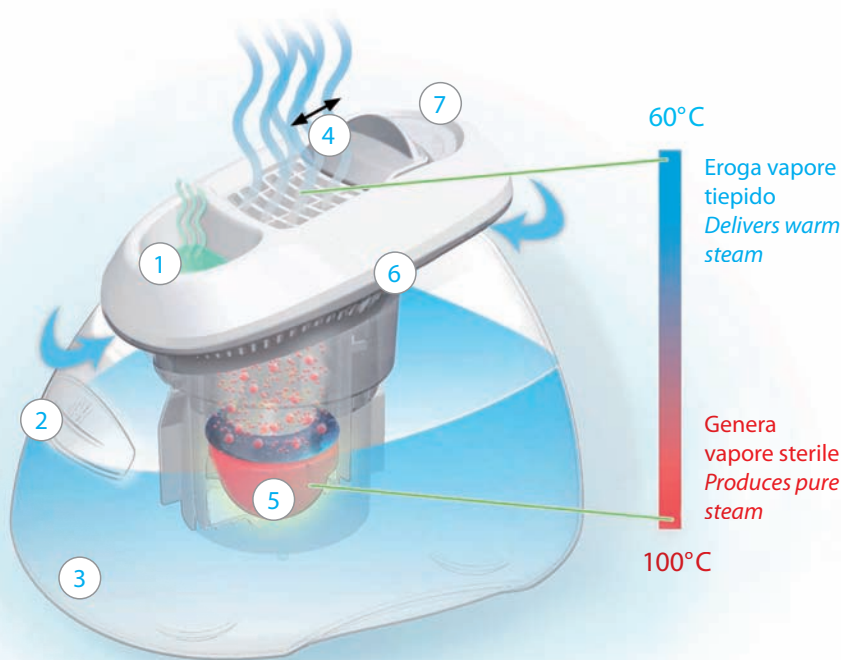

Modello depositato

16421A0-0 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2014 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.

SINCE 1966
MADE IN ITALY
FLAEM
a healthy lifestyle

Fabbricante/Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda
con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system



Export Department of FLAEM NUOVA

medexpo
international s.r.l.

3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy
Phone (39) 02 4120769
Fax (39) 02 48376295
E-mail: info@medexpointernational.com

www.fluem.it

Numero Verde
800 236622
SERVIZIO CLIENTI FLAEM