



PERISPHERA® - H

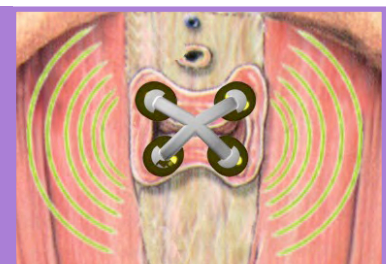

Sonda vaginale a 4 elettrodi, per la rieducazione perineale, mediante elettrostimolazione e biofeedback EMG

E' caratterizzata da un doppio circuito, costituito da 4 elettrodi disposti radialmente, destinato ad intercettare separatamente i due rami (Sn e Dx) del muscolo pubo-coccigeo. Offre il vantaggio di poter trattare, con 2 canali di elettrostimolazione o 2 canali di biofeedback EMG, i due rami del pubo-coccigeo, simultaneamente ma con parametri diversi (nei casi di asimmetria muscolare per esiti da episiotomia).

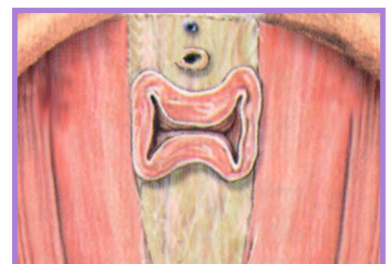

Gli elettrodi della sonda PERISPHERA®-H, si adattano perfettamente alla cavità vaginale a riposo, caratterizzata appunto da un profilo "ad H". Le due coppie di elettrodi che intersecano i rami di SX e di DX del pubo-coccigeo, permettono la rilevazione separata del potenziale di azione (EMG) prodotta da ciascuno dei due rami in fase di contrazione, fornendo al rieducatore informazioni oggettive sullo stato muscolare del piano perineale.