

LA VOSTRA PROFESSIONE SI EVOLVE, LE SOLUZIONI PER L'ANALISI DELLA FUNZIONE VISIVA DI ESSILOR, ANCHE!



VISIOSMART™

**ESSILOR, LEADER MONDIALE DELLA
CORREZIONE VISIVA, OFFRE LA PROPRIA
EXPERTISE PER OGNI NECESSITÀ DI VISIONE.**

Per progettare un nuovo analizzatore delle funzioni visive in grado di incontrare e rispondere alle aspettative degli operatori del settore, gli ingegneri Essilor hanno contattato numerosi medici per studiare insieme nuovi approcci e soluzioni.

VISIOSMART rappresenta la generazione più avanzata di strumenti dedicati allo screening visivo.

Completamente digitale, vi permette di effettuare ogni tipologia di esame attraverso l'interfaccia touch semplice ed intuitiva.

3 SOLUZIONI PER 3 TIPI DI ORGANIZZAZIONE



VISIOSMART™
elite

La soluzione più completa, collegata al tablet, per la massima facilità d'uso, libertà e personalizzazione.

VISIOSMART™
PC

Per chi desidera mantenere il controllo dell'attività di dépistage mediante un pc.

VISIOSMART™
classic

Versione manuale compatibile con strumenti informatici.

<p>TEST PRELIMINARI</p> <p>Rilascio dell'accomodazione Acuità: lettere / numeri / Landolts / Snelle / Raskin Scale logaritmiche / stereoscopia</p>	●	●	●
<p>TEST REFRAATTIVI</p> <p>Bicromatico (Rosso/Verde) Astigmatismo Tendenza Ipermetropia</p>	●	●	●
<p>TEST NON REFRAATTIVI</p> <p>Test dei colori Sensibilità al contrasto Campo visivo orizzontale</p>	●	●	●
<p>DISTANZE</p> <p>Visione da Lontano a 6 m. Visione Intermedia a 67 cm. Visione da Vicino a 40 cm.</p>	●	●	●
<p>TEST COMPLEMENTARI IN VISIONE INTERMEDIA E VICINO</p>	●		
<p>PROTOCOLLI DEI TEST</p> <p>Standard: 4 protocolli integrati Personalizzabili Modalità automatica con sintesi vocale</p>	● ● ●	● ● auto: opzionale	●
<p>CONNETTIVITÀ</p> <p>Salvataggio dei dati Esportazione dati a software gestionali</p>	● ●	● ●	
<p>AIUTO IN LINEA</p>	●	●	●
<p>Campo visivo orizzontale</p>	60°, 70°, 80°, 90°, 100° e campo nasale		
<p>Sistema di illuminazione</p>	Schermo ad alta risoluzione Luminanza dei test (rispetto norma ISO 8596): 200 cd/m ²		
<p>Dimensioni e Peso</p>	L 290 mm X H 450 mm X P 400 mm - 5,5 kg		
<p>Tensione di alimentazione</p>	100 - 240 V / 50 - 60 Hz		
<p>Consumo elettrico</p>	50 W		

ACCESSORI**

- Copertura di protezione
- Valigia di trasporto dedicata trolley (opzionale)
- Telecomando supplementare (opzionale)
- Cuffie (opzionale)

Ogni miglioramento o eventuali modifiche possono essere effettuate senza alcun preavviso e non costituiscono vincolo contrattuale.
Visiosmart™ è un marchio registrato di Essilor International.

“Il mio lavoro richiede
una nuova generazione di strumenti
per lo screening visivo”



VISIOSMART™

LA NUOVA DIMENSIONE DELLO SCREENING VISIVO





+ MAGGIORE EFFICACIA



PERCHÉ DISPONETE DI MENO TEMPO

Con VISIOSMART, i test verranno visualizzati istantaneamente per favorire un'ottimizzazione dei ritmi di lavoro e produttività. L'intuitivo uso dell'interfaccia touch di VISIOSMART, vi permetterà di semplificare ogni singola operazione ottimizzando il vostro tempo (quattro protocolli preimpostati già a vostra disposizione).



PERCHÉ AUMENTARE LA VOSTRA PRODUTTIVITÀ È IMPORTANTE

Grazie alla modalità automatica potrete svolgere dei protocolli completi. La funzione vocale guida il paziente nelle fasi dei test e voi sarete liberi da compiti ripetitivi.

PERCHÉ DOVETE POTER PERSONALIZZARE I VOSTRI PROTOCOLLI RAPIDAMENTE

Con VISIOSMART potrete creare in maniera semplice e veloce, ogni sequenza di test e protocollo che desiderate, rispondendo ai massimi livelli di personalizzazione, velocità ed adattabilità a tutti gli esami ed indagini inerenti ai rischi lavorativi.





+ MAGGIORE PRECISIONE

PERCHÈ ELEVARE GLI STANDARD QUALITATIVI VALORIZZA LA VOSTRA PROFESSIONALITÀ

La struttura ergonomica di VISIOSMART assicura un eccellente rispetto della postura del soggetto, grazie alla sua maschera in grado di adattarsi a qualsiasi morfologia. Inoltre, nel rispetto delle normative, offre una luminanza uniforme e costante dei test indipendentemente dalle condizioni di luce. L'obiettivo è quello di realizzare una sequenza di test di altissima affidabilità, precisione, affidabilità e riproducibilità.




PERCHÈ AVETE BISOGNO DI TEST VALIDATI DALLA COMUNITÀ SCIENTIFICA

L'ampia gamma di test proposti da VISIOSMART risponde a differenti bisogni: misurazione dell'acuità visiva, tendenza ipermetropica, visione dei colori e dei contrasti, test della visione binoculare, ecc.

Si tratta di test divenuti modelli riconosciuti e approvati dagli esperti del settore.



+ MAGGIORI POSSIBILITÀ

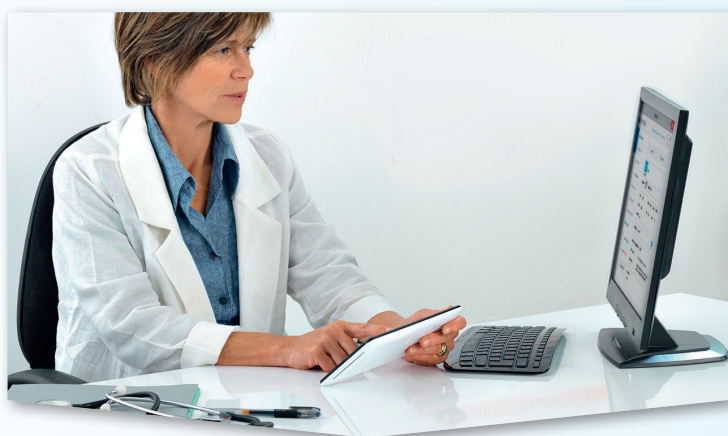


PERCHÈ LAVORATE CON STRUMENTI INFORMATICI CONNESSI

Con un semplice click, grazie all'interfaccia integrata, avrete la possibilità di esportare i test nella cartella del paziente.

PERCHÈ POSSIATE ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ

Grazie ai test programmabili e all'interfaccia di facile utilizzo, VISIOSMART vi permetterà di organizzare al meglio tutte le visite coinvolgendo il personale della vostra équipe.

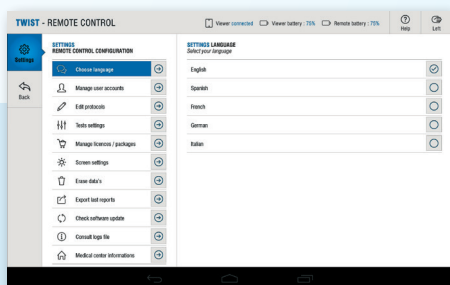

PERCHÉ ADATTARVI ALLE LINGUE STRANIERE È UNA NECESSITÀ

Con la modalità «voce» disponibile in diverse lingue, VISIOSMART vi consente di adattare facilmente i test alla lingua conosciuta dal paziente.

PERCHÈ DOVETE ANTICIPARE CIÒ CHE NON È ANCORA PREVISTO

VISIOSMART è adattivo! Massima rapidità ad eventuali cambiamenti organizzativi o alle evoluzioni del contesto regolamentare.