




SINCE 1966  
MADE IN ITALY

**Aspira**<sup>go</sup>  
by **FLAEM**<sup>®</sup>

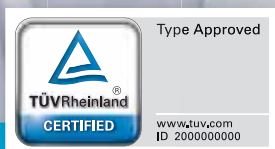

## **Aspiratore chirurgico portatile a batterie Portable surgical aspirator, battery powered**

- Design compatto
- Leggero, struttura in plastica
- Utilizzabile ovunque grazie alle batterie al litio facilmente sostituibili
- Semplice manutenzione e facile sanificazione
- Facile e intuitiva lettura delle funzioni
- Pratico comando manuale del flusso aspirante
- *Compact design*
- *Lightweight, plastic case*
- *For use everywhere. Easily replaceable Lithium-ion battery pack*
- *Simple maintenance and sanitization*
- *Intuitive reading of functions*
- *Convenient manual suction regulation*

**CARATTERISTICHE TECNICHE  
 TECHNICAL FEATURES**

Pompa aspirante rotativa a pistone privo di lubrificazione <i>Rotative piston suction pump without lubrication</i>	
Designazione <i>Designation</i>	Alto vuoto / alto flusso <i>High vacuum / high flow</i>
Alimentazione <i>Operating voltage</i>	100-240V 50-60Hz 12V DC
Livello depressione regolabile <i>Adjustable vacuum range</i>	da -0,10 a -0,80 bar approx. <i>from -0.10 to -0.80 bar approx.</i>
Portata aria <i>Air flow</i>	20 l/min approx.
Rumorosità (a 1 m) <i>Sound level (at 1 m)</i>	63 dB (A) approx.
Dimensioni <i>Dimensions</i>	36 (L) x 14 (P) x 27 (H) cm 14.2 (length) x 5.4 (width) x 10.5 (height) in
Peso totale <i>Total weight</i>	2,5 Kg 2.5 Kg - 12.8 lb
Autonomia batteria Li-ion <i>Operation with fully charged Li-ion battery</i>	45 minuti approx. 45 minutes approx.
Tempo di ricarica batteria <i>Battery recharge time</i>	7 ore (minimo) 7 hours (minimum)
Uso <i>Use</i>	30 minuti ON - 30 minuti OFF 30 minutes ON - 30 minutes OFF

**OMOLOGAZIONI  
 APPROVALS**

Norma di riferimento: ISO 10079-1 aspiratori azionati elettricamente. <i>In compliance with: ISO 10079-1 electrically powered suction equipment</i>	 Type Approved www.tuv.com ID 2000000000
Conforme alla <b>Direttiva Europea 93/42/EEC</b> e successivi aggiornamenti <i>In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive and subsequent amendments</i>	
Codice/Code	<b>AR20P00</b>
Imballo/Master carton	n° 2 pz./2 piece
	
Garanzia <i>Warranty</i>	<b>3 ANNI</b> <i>Please refer to your local dealer</i>

**ACCESSORI IN DOTAZIONE (RICAMBIABILI)  
 ACCESSORIES (SPARE PARTS)**

Vaso di raccolta secreti, sterilizzabile, da 1000 ml <i>Sterilizable 1000 ml collection jar</i>
Tubi di collegamento in silicone sterilizzabili <i>Sterilizable silicone connection tubing</i>
Filtro antibatterico/antivirale, idrofobico <i>Antibacterial/antiviral and hydrophobic filter</i>
Cannula sterile monouso CH18 <i>Disposable sterile suction catheter CH18</i>
Comando manuale del flusso aspirato monouso <i>Disposable manual suction regulator</i>
Carica batterie da rete con alimentatore multivoltaggio <i>Multi voltage power supply unit and battery charger</i>
Cavo con presa accendisigari 12V DC per alimentazione e per ricarica batterie <i>12V DC cigarette-lighter cord for power supply and battery charge</i>



**ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES**

Borsa da trasporto / <i>Carrying Bag</i>
Kit di aggancio per sedia a rotelle / <i>Attachment kit for wheelchairs</i>
Portavasò aggiuntivo / <i>Additional jar holder</i>



*Patented Product and PCT International Patent Pending*



*Fabbricante/Manufacturer:*  
 FLAEM NUOVA S.p.A.  
 Via Colli Storici, 221  
 25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy  
 Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287  
 info@flaemnuova.it

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato  
 Company with certified quality system



Export Department of FLAEM NUOVA  
  
 medexpo international s.r.l.  
 3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy  
 Phone (39) 02 4120769  
 Fax (39) 02 48376295  
 E-mail: info@medexpointernational.com

[www.flam.it](http://www.flam.it)

Numero Verde  
  
 SERVIZIO CLIENTI FLAEM