

POLTRONA ELEVABILE ELETTRICA ASIA II

Ref. Asia II-1 (1 motore) – Ref. Asia II-2 (2 motori)



Il colore del modello nella foto è puramente indicativo

Descrizione

Poltrone elevabili dal design classico, avvolgente e confortevole, disponibile con 1 o 2 motori. Struttura in legno rivestito da uno strato di poliuretano e meccanica in metallo. Rivestimento in tessuti con trattamento antimacchia o ecopelle, disponibili in diversi colori (Vedi tabella colori). Poliuretano espanso ecologico a densità differenziata rivestito da una falda in Dacron. Piedini in PVC resistente.


Il meccanismo della poltrona a due motori permette la regolazione separata dell'inclinazione dello schienale e dell'alza gambe. La soluzione ad un motore, invece, permette di regolare il movimento dello schienale e dell'alza gambe in simultanea. Le poltrone sono equipaggiate di serie con 2 rotelle posteriori che, inclinando le poltrone all'indietro, permettono di spostarle facilmente. Possono essere dotate, a richiesta, di un pratico meccanismo di sollevamento (ROLLER vedi tabella accessori) su quattro ruote indipendenti azionato mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore: un sistema funzionale e pratico che permette di spostare facilmente una poltrona da una stanza all'altra.

Destinazione d'uso

Ausilio indicato per persone con limitate capacità motorie.

| | | |
|---|--|--|
| Dispositivo Medico | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Codice CND | Y123606 | |
| Identificativo di Registrazione | 1225618 | |
| Codice Classificazione ISO | nd | |
| Conformità alla Direttiva 93/42/CEE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Classe del dispositivo medico | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III | |
| Marcatura C.E. | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Ente Certificatore | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| (Nome e numero dell'Ente) | n/a | |
| Sterile | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Metodo di sterilizzazione | n/a | |
| Periodo di validità | n/a | |
| Latex Free | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Anno immissione in commercio | 2020 (INTERMED) | |
| Garanzia | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura | |
| Fabbricante | SPAZIORELAX spa | |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP | n/a | |
| Distributore | INTERMED S.r.l. | |

Caratteristiche tecniche e ingombri

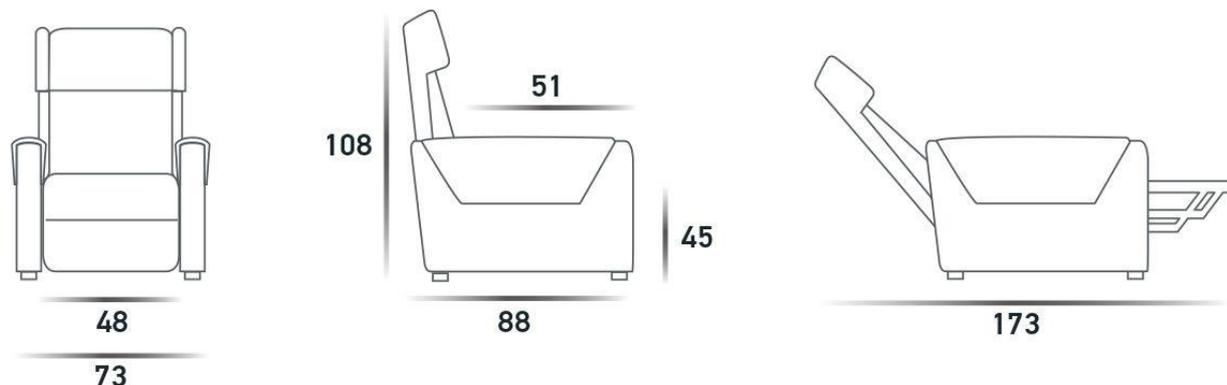

| Modello | Peso | Portata |
|-----------|-------|---------|
| Asia II-1 | 45 Kg | 120 Kg |
| Asia II-2 | 47 Kg | 120 Kg |

Composizione Tessuti (Consultare la tabella colori per la scelta)

Tessuto Savoy: 89% Poliestere - 8% Poliammidica – 2% Cotone - 1% Viscosa – Peso: gr/mtl. 550

Tessuto Globe: 100% Poliestere – Peso: gr/mtl. 560

A richiesta disponibili rivestimenti in materiale Ecopelle nei vari colori

Asia II-1: Posizione Relax Pediera anticipata. È un meccanismo a 1 motore che permette, grazie alla funzione anticipo pediera, di sollevarla prima dell'abbassamento dello schienale. Consente di raggiungere una posizione con schienale eretto adatta a leggere un libro o a guardare la televisione comodamente seduti in poltrona.

Asia II-2: Posizione Relax Indipendente. È un meccanismo a 2 motori capace di generare il movimento dello schienale in modo autonomo rispetto a quello del poggiatesta. In questo modo, grazie alla possibilità di selezionare quale congegno attivare, è possibile ottenere differenti combinazioni.

A richiesta disponibili modelli extra large rinforzati con portate di 160 Kg o 250 Kg

Accessori

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|------------|--|-----------------|
| ROLLER | Meccanismo di sollevamento su quattro ruote indipendenti | 1 |
| Asia II-AF | Kit fodere di protezione | 1 |
| ASIA II-AB | Batteria ricaricabile | 1 |

Informazioni utili

| | |
|--------------------------------|---|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso. |
| CONSERVAZIONE | Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. |
| MANUTENZIONE E PULIZIA | Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. |

Contenuto della confezione

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|---------------|---|-----------------|
| Asia-x* | Poltrona elevabile | 1 |
| Manuale d'uso | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo | 1 |

*Poltrona nella configurazione scelta

Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA | MODIFICA |
|------|------------|---|
| 1.0 | 05/02/2020 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |
| 1.1 | 26/11/2020 | Aggiornamento codici accessori |

